

www.surgident.co.kr

Каталог продукции

Product Catalogue

Ideal Dental Solution for Satisfaction with happiness



 shop-dss.ru

☎ +7 (960) 914-01-11
☎ +7 (960) 916-07-05
☎ +7 (905) 078-55-77

✉ dss.42@mail.ru

 Surgident™

About Surgident

“Удовлетворение клиентов начинается с удовлетворения их потребностей.”

Наша компания постоянно расширяет свою деятельность после своего основания в 2006 году. Высокое качество нашей продукции и доступные цены привлекают внимание многих клиентов не только внутри страны, но и за рубежом.

Чтобы удовлетворить потребности клиента мы расширяем виды высокотехнологичного оборудования, в том числе CNC Multi-purpose Machines и мы постоянно работаем над изучением требований пользователей. Мы изучаем мнения профессиональных врачей, медицинских работников и клиентов, а также инициируем разработку новой продукции.

Surgident, расширяет сферы бизнеса путем производства и разработки продукции для проведения операции по импланту, старается всегда удовлетворять потребности потребителя и стремится стать лидером в производстве стоматологического оборудования.

Спасибо.

Daniel Hur, CEO



History of Surgident

- 2006.10 Established
- 2007.04 KGMP acquisition
- 08 Approved from KFDA(Authorization to manufacture Medical instrument)
- 2010.08 Relocated to Seongnam city for company expansion
- 2011.04 ISO13485 acquisition
- 10 Acknowledged as Venture company
- 12 CE acquisition
- 2012.04 FDA acquisition
- 2014.09 Japan MHUV Accreditation
(Certificate of foreign manufacturer)

Status of Certification

Surgident обладает не только сертификатом качества на продукцию, но и сертификатом венчурного предприятия. Мы прилагаем максимум усилий для усовершенствования системы управления с целью занять лидирующую роль в сфере стоматологии.



KGMP



ISO 13485:2003



Venture company



CE



FDA





SD-TORQUE	05
SINGLE-OUT	06
MP20	08
TOCA-KIT	10
AQUA TOCA-KIT	12
TOLA-KIT	14
WRS-KIT	16
NLBC-KIT	17
EASY SINUS-KIT	18
OSTEOTOME SET	20
RIDGE SPLIT-SET/OCHENBEIN CHISEL	21
BONE MULTI SYSTEM	22
BONE EXPANDER-KIT	24
BONE SPREADING-KIT	25
TOP-SYSTEM	26
SD REAMER-SET/STOP DRILL KIT/IPD KIT	28
TRIMMER-KIT	30
BONE MILL	31
P.R.F SYSTEM	32
BASIC-KIT	33



SD-TORQUE SD-TQ

После сканирования QR-кода, следует автоматическое распознавание, далее вы можете проверить информацию о продукте и просмотреть видео.

При установке имплантата в стоматологии как инструмент, который используют в самом конце.

Installation



- Поверните вправо Latch Key, после регулировки Driver-a, поверните его обратно влево и закрепите.

Torque control




- С помощью крутящегося селектора вы можете получить желаемый размер.

Operation



- После выбора необходимого размера селектора, поворачивайте его вправо до щелчка. (Для разбора инструмента поверните его в обратную сторону).

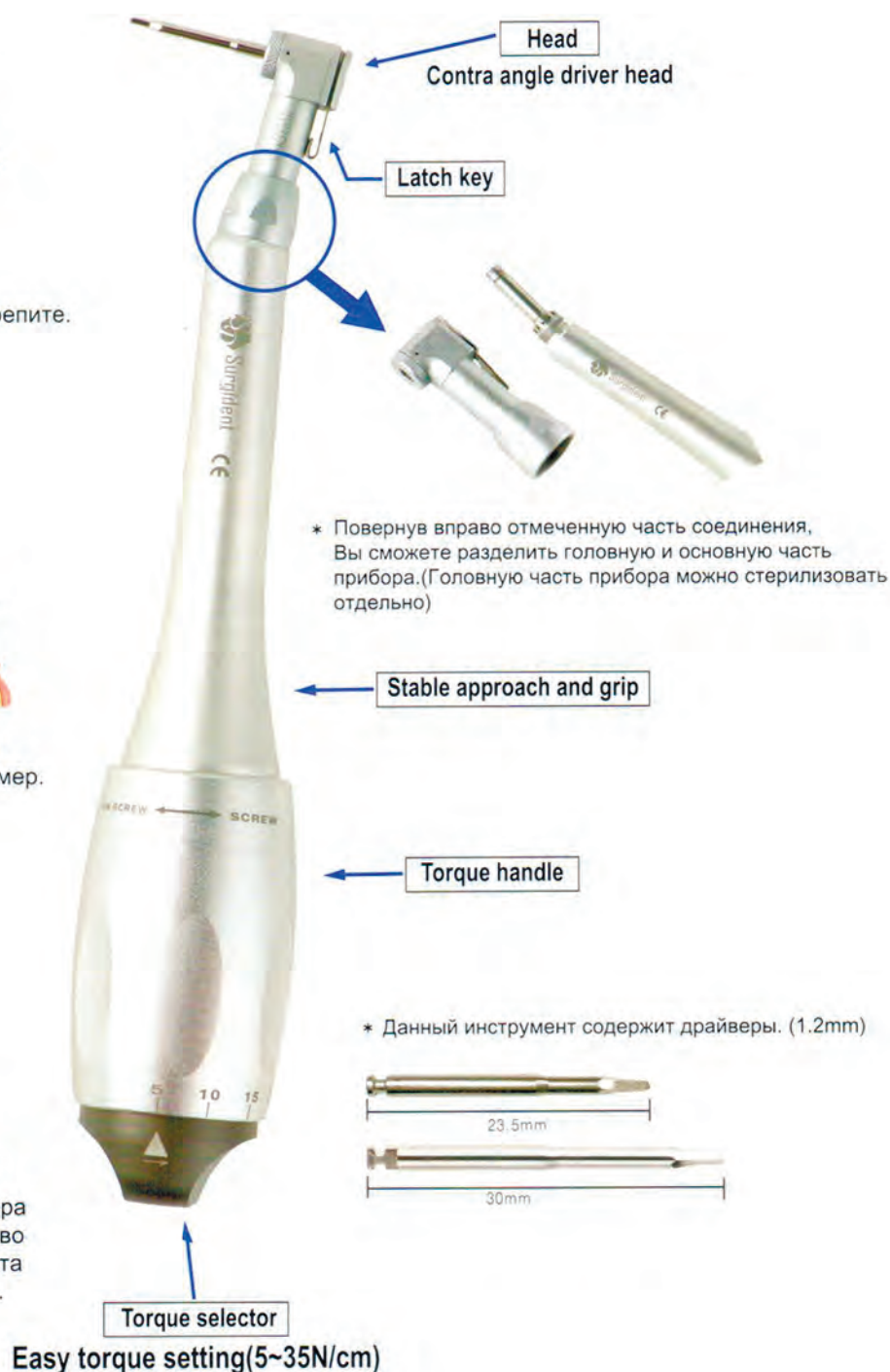

SINGLE-OUT SD-SO

Наиболее оптимальный комплект инструментов для переустановки импланта, после его удаления по причине возникновения воспаления, повреждения костной ткани вокруг него или приостановки.



Fixture remover screw

· Винтовое крепление в Fixtureустановленное вместе с Fixture remover.



Code	Length	Diameter
M 1.4	18.5mm	Ø 1.4
M 1.6	18.5mm	Ø 1.6
M 1.8	18.5mm	Ø 1.8
M 2.0	18.5mm	Ø 2.0
M 2.5	18.5mm	Ø 2.5
1-72UNF	18.5mm	1-72UNF (Ø1.85)

Fixture remover tip

· Соприкоснется с установленным Implantfixture наконечником Fixtureremover.



Code	Diameter
FT-38	Ø 3.8
FT-46	Ø 4.6
FT-53	Ø 5.3
FT-62	Ø 6.2

Hex driver

· Инструмент, используемый при закреплении Removerscrew в Implantfixture.



Code	Length
DV-5	5mm
DV-11	11mm
DV-16	16mm

Fixture remover body

· Корпус Fixtureremover.



Code	Length (with Fixture remover tip)
FR-15	15mm
FR-20	20mm


Fixture remover adapter

· Адаптер, комплектующий Fixtureremoverbody и tip.



Diameter
Ø 5.6 (Ø 5.1-Inside)

Torque Wrench

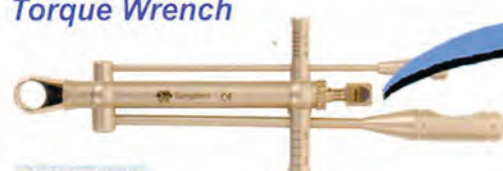

SDWRH-01



Взяв за штифт со стрелкой, повернуть на 180 градусов,

Направление закрепления можно изменять, поворачивая штифт по часовой или против часовой стрелке.
* Ncm : 30-500

Assembly



How to use Single-out




- 1 Удалить верхнюю часть строения Implantfixture.



- 2 Закрепить Fixture, повернув Screw по часовой стрелке, соответственно специфике Implantfixture.



- 3 Используя Hex driver и Torque wrench, скрепить, закрепленный на Fixture, Screw по 40~80 N/cm.

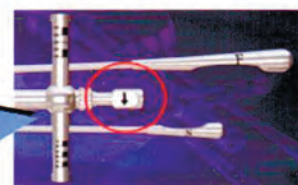

※ Следовать по направлению, показанному на рисунке.




- 4 Собрать Fixtureremoverbody, tip, adapter как изображено на рисунке.



- 5 Собранный Fixtureremover повернуть против часовой стрелки и вставить Screw, закрепленный в Fixture.



- 6 После закрепления Torque wrench повернуть против часовой стрелки, и Fixture выпадет. (250~450 N/cm)

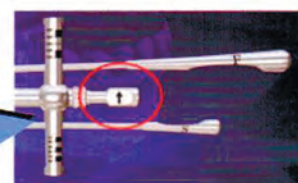

※ Следовать по направлению, показанному на рисунке.




- 7 Вытащив Fixture, отделить от Remover screw.



MP20 SD-MP

: Master piece 20

Ример для сверления верхней челюсти со специальным дизайном и новый вид Aqua наконечника - это набор для быстрой и удобной операции верхней челюсти.

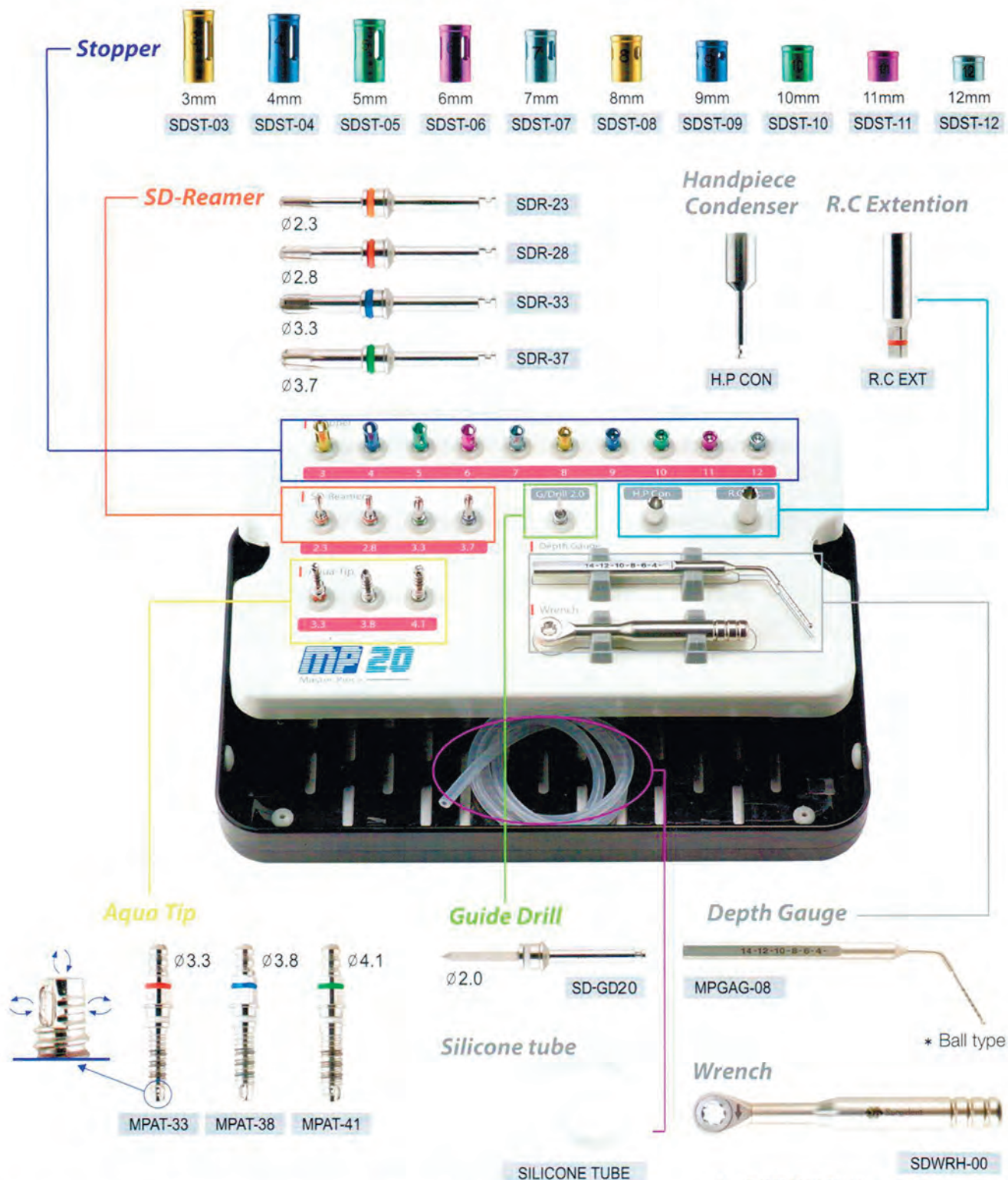

Clinical case



Зона лечения: #15



После разделения десны раскройте верхнюю часть челюсти.



Просверлите зону лечения, используя руководство по сверлу и стоппер.



После соединения стоппера в ример, просверлите зону лечения.



После завершения остеотомии, сквозное состояние поверхности верхней челюсти.



С помощью гаечного ключа и расширителя вставьте аква-наконечник.




Подсоедините силиконовые трубки а аква-наконечник.
Заметка: Нужно вставить силиконовые трубки в часть соединения аква-наконечника, далее повернуть по часовой стрелки, после чего они устанавливаются.



После заполнения солевым раствором силиконовые трубки с помощью шприца, используя давление, поднимите мембрану.



После поднятия мембраны, вытяните солевой раствор с помощью шприца.

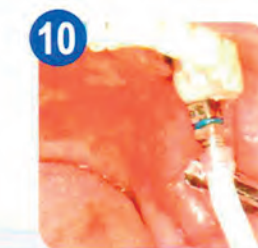

После замены шприца, заполните материалом костного трансплантата жидкого типа или типа пасты.



Имплантируем имплантат.




TOCA-KIT **SD-TOCA**

:Tool of Crestal Approach

После сканирования QR-кода, следует автоматическое распознавание, далее вы можете проверить информацию о продукте и посмотреть видео.

С помощью набора для проведения операции верхней челюсти, который состоит из разнообразных инструментов, и римера для сверления верхней челюсти со специальным дизайном, Вы можете безопасно провести операцию верхней челюсти.

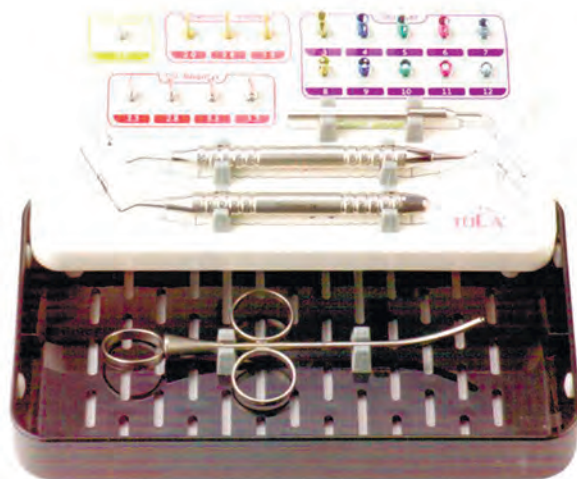

SD-Reamer

: Свело для отверстия во верхней челюсти

- Используется для перфорирования верхней челюсти.
- При сверлении не повреждает мембраны верхнечелюстной пазухи и эффективно сверлит отверстие в верхней челюсти.
- Рекомендуемые обороты: 800~1200

SD-RM23



SD-RM28




SD-RM33



SD-RM37



Свело для отверстия во верхней челюсти

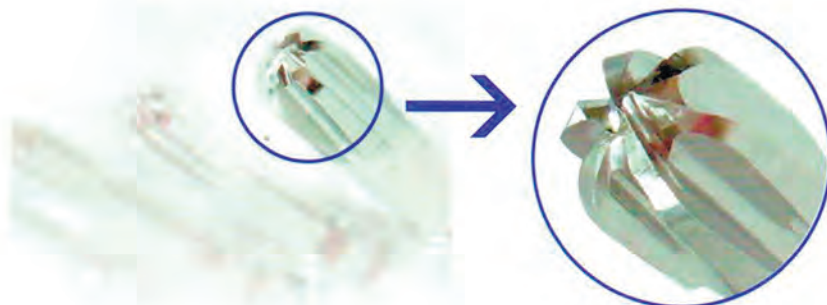


- Сертификат -



Diamond reamer

- После удаления зубов, быстро удаляет грануляционную и мягкую ткань.
- При тонкой кости, выполняет роль начального гида.
(в случае когда другие кости близко расположены к мембране)
- Рекомендуемые обороты: 800~1200

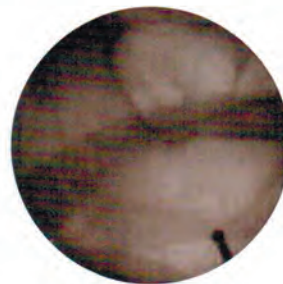

TOCA-DR20



TOCA-DR28



TOCA-DR33

Guide drill

GD-20

- Перед перфорированием, для определения точного места используйте Guide hole.



Диаметр(Ø): 2.0 Длина(мм): 32.5



Sensor gauge

TOCA-SG

- Данный инструмент первоначально проверяет мембрану верхнечелюстной пазухи, предназначенной для перфорирования.

Depth gauge

GAG-08

- После сверления измеряет глубину отверстия.



Bone packer

TOCA-BP

- Инструмент, который проталкивает трансплантационный материал внутрь синуса.



Bone syringe

BS-01

- Подвиньте продавленный трансплантационный материал внутрь отверстия и установите.



Stopper set

- Предотвращает повреждение мембраны или сверление слишком глубокого отверстия.(3~12mm)



3mm

ST-03



4mm

ST-04



5mm

ST-05



6mm

ST-06



7mm

ST-07



8mm

ST-08



9mm

ST-09



10mm

ST-10



11mm

ST-11



12mm

ST-12




AQUA TOCA-KIT SD-AQUA

После сканирования QR-кода, следует автоматическое распознавание, далее вы можете проверить информацию о продукте и просмотреть видео.

Набор инструментов для низкого риска перфорации с использованием гидравлического давления при подъеме мембраны.

Инъекция солевого раствора минимизирует повреждения мембраны верхнечелюстной пазухи, изменяет форму мембраны на куполообразную форму с помощью римера для сверления специального дизайна и аква лифтинговой системы. Благодаря остальным приборам безопаснее по сравнению с операцией мембраны верхнечелюстной пазухи, и практически нету рисков во сверлении отверстия.

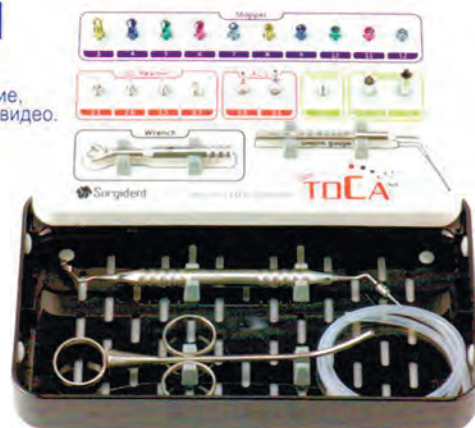

SD-Reamer

: Свело для отверстия во верхней челюсти

- Используется для перфорирования верхней челюсти.
- При сверлении не повреждает мембраны верхнечелюстной пазухи и эффективно сверлит отверстие в верхней челюсти.
- Рекомендуемые обороты: 800~1200



- Сертификат -



SD-RM23

Ø 2.3

SD-RM28

Ø 2.8

SD-RM33

Ø 3.3

SD-RM37

Ø 3.7

ALS: Aqua Lift System

- После использования римера, АЛС закрепите во внутрь сквозного отверстия в верхнечелюстной кости. (используйте гаечный ключ и Implant engine)
- При поднятии АЛС на верхнечелюстной надкостнице, она переливает солевой раствор во внутрь отверстия.
- Отверстие АЛС со солевым раствором устанавливается в количестве 5 штук, 4 с 4 сторон и 1 на вершину. Солевой раствор, инъецируемый здесь, безопасно сдвигает и меняет форму мембраны на купольную форму.



SILICONE TUBE

Handpiece condenser

- Соединяются АЛС и имплантат.
- Рекомендуемые обороты: 30~40
- Рекомендуемый N/cm: 20

H.P CON



R.C EXT



SDWRH-00



* Имеет силиконовые трубы.

Ratchet extension

- Применяется в случае тяжелого подхода гаечного ключа из-за близкого расположения зубов около отвестия.

Wrench

- Используется для механического закрепления АЛС.




• AQUA TOCA KIT содержит одинаковые инструменты как в TOCA KIT, набор стоппера, гид дрель, глубиномер, костный паккер, костный шприц.




How to use



1 • Используя гид сверло, отметьте зону лечения.

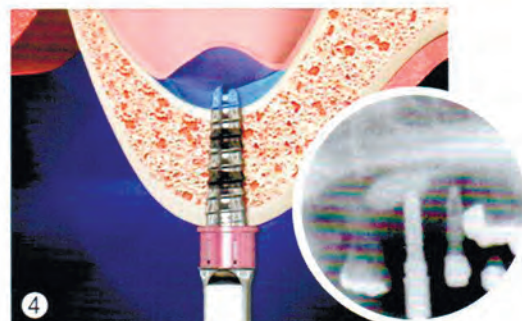


4 • Поднимите мембрану гидравлическим давлением, подсоединив шприц.

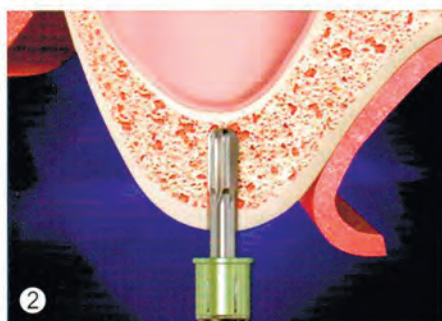


2 • После соединения стоппера нужного размера, просверлите до глубины 1 мл до надкостницы.



5 • После поднятия мембраны, с помощью костного паккера заполните внутри имплантатом.

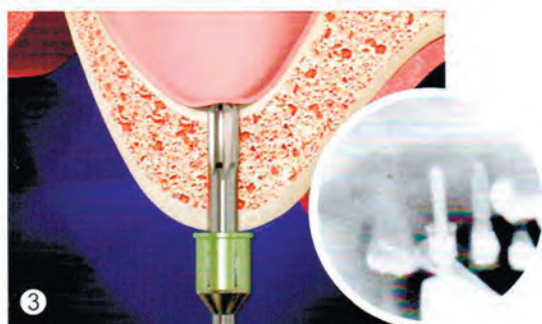

3 • Закрепите внутри отверстия АПС.

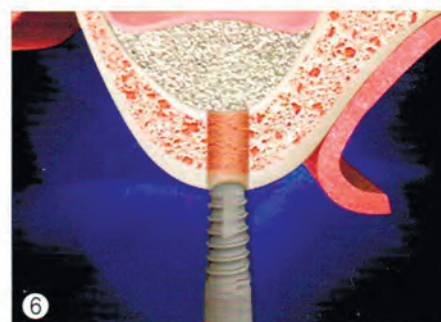

6 • Установите крепление.




TOLA-KIT SD-TOLA

: Tool of Lateral Approach

После сканирования QR-кода, следует автоматическое распознавание, далее вы можете проверить информацию о продукте и просмотреть видео.

Набор инструментов для быстрого и безопасного формирования пазухи бокового окна.

В случае если остаточная кость по размеру от 1 до 3 мм, при альвеолярном подходе, если мембрана перфорировалась, будет эффективнее установить несколько имплантатов одновременно.

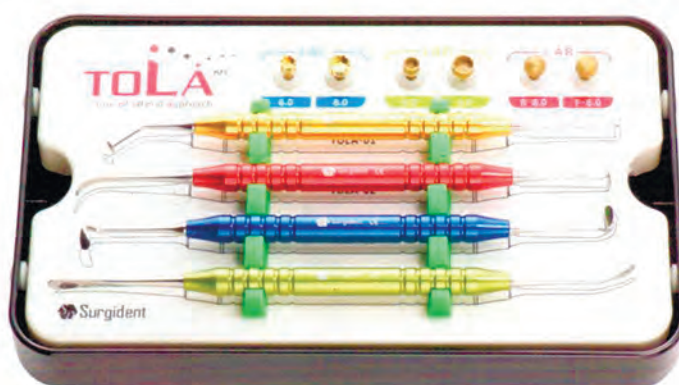

Sinus curette

- Используется при поднятии мембраны.
- Пронумерованы для поочередного использования при подходе или поднятии зоны лечения.

TOLA-01




TOLA-02



TOLA-03



TOLA-04

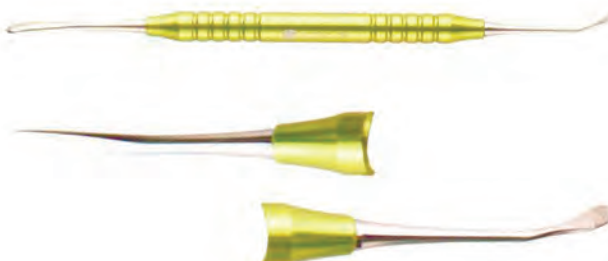

LAC : Lateral Approach Cutter

· При использовании бокового резака , дает противоскольжение и маркирует зону лечения.




* Размеры

Диаметр (φ)	Длина (mm)
6.0	20
8.0	20

* Рекомендуемые обороты: 800~1200

LAD : Lateral Approach Drill

- Сверло, которое безопасно создает отверстие в боковой стенке.
- Глубиномер установлен.
- Покрит специальным покрытием из алмазного материала, в связи с чем минимизирует повреждение мембраны даже при соприкосновении.

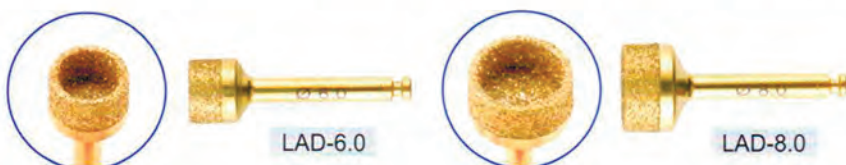

* Размеры

Диаметр (φ)	Длина (mm)
6.0	20
8.0	20

* Рекомендуемые обороты: 800~1200

LAR : Lateral Approach Reamer

- Это ример, который используется в недоступных зонах для бокового резака.
- Покрит специальным покрытием из алмазного материала, в связи с чем минимизирует повреждение мембраны даже при соприкосновении.




* Размеры

Диаметр (φ)	Длина (mm)
8.0	20
8.0	20

* Рекомендуемые обороты: 800~1200

Surgical operation

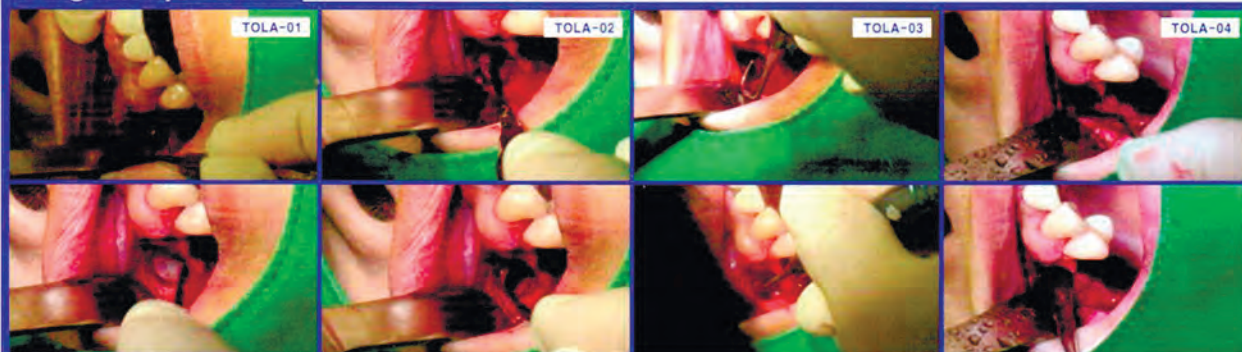

WRS-KIT SD-WRS

: Water Rising System

Набор компонентов аква-наконечников для пользователей, которые уже использует продукты для альвеолярного подхода или которые хотят АЛС.



Aqua tip

- Закрепите пазуху внутренней стенки, используя гаечный ключ и имплантат.
- Солевой раствор, который вводится в 5 отверстий, находящиеся на переднем и верхнем наконечнике, безопасно поднимает мембрану, предавая ей форму купола.




Aqua hole 5ea
: 4 at side and 1 on top



SILICONE TUBE

Длина: 50cm

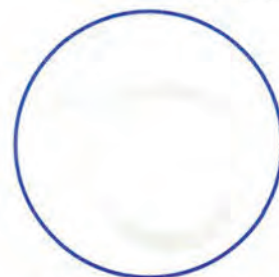

* Имеет силиконовые трубы.

Stopper set

- Состоит из множество видов размеров, соедините с аква наконечником и используйте. (3-12 мл)






NLBC SD-NLBC

: Never Loss Bone Collector

После сканирования QR-кода, следует автоматическое распознавание, далее вы можете проверить информацию о продукте и просмотреть видео.

Инструмент для сбора собственной кости пациента для аутотрансплантата с помощью дрели во время операции имплантата.

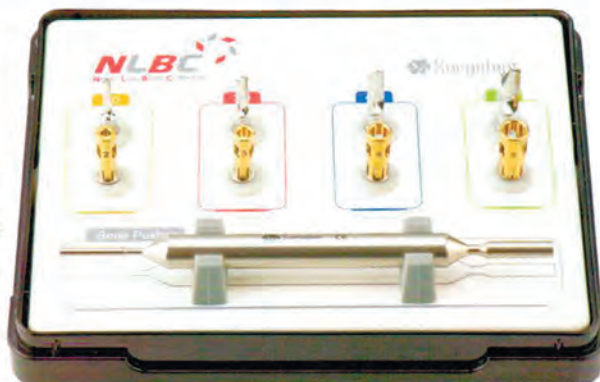

How to use

- Соедините сверло костного коллектора нужного размера со стоппером. (Стоппер соединяется рядом с покрытой частью сверла)
- Сделайте отверстие сверлом в области соединения собственной кости пациента или в области имплантации. (Рекомендуемые обороты: 300, рекомендуемый N/cm: 50)
- Согласно сверления стоппер заходит внутрь сверла, общая глубина составляет 4 мм. (идентичен на все размеры)
- После отсоединения стоппера сдвиньте кость внутри стоппера с помощью костного пушера. (толкатель)

① Before drilling



② After drilling



Micro Drill

Микродрель может точно просверлить без скольжения.

NLBC Ø2.0



NLBC-ST2

NLBC-2.0

NLBC Ø3.0



NLBC-ST3

NLBC-3.0

NLBC Ø4.0



NLBC-ST4

NLBC-4.0

NLBC Ø5.0



NLBC-ST5


NLBC-5.0

Bone Pusher



NLBC-BP

NLBC-KIT

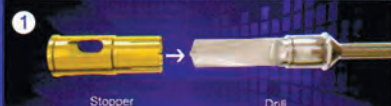

Engage NLBC to engine and apply stopper



Engage NLBC to engine and apply stopper



When one of stoppers is completely merged, the total depth is 4mm.



Guide drilling at where to place implant. (recommended RPM : 5,000)



Guide drilling at where to place implant. (recommended RPM : 500-600)




0.1g can be harvested at 1time use of Ø5.0

BONE PUSHER


Collected more bones inside of stopper using bone pusher.

EASY SINUS-KIT SD-ES


Удобный и безопасный набор инструментов, используется для получения правильного количества костной ткани во время имплантации на верхней челюсти.

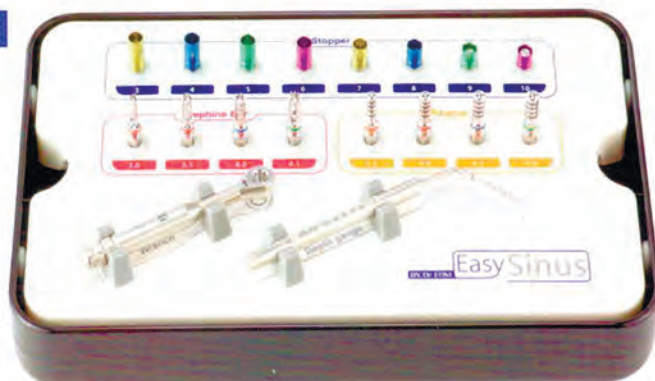

ES-Reamer

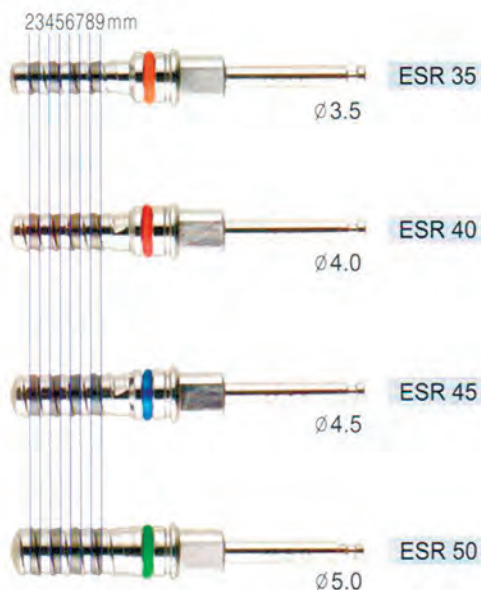

Trephine bur

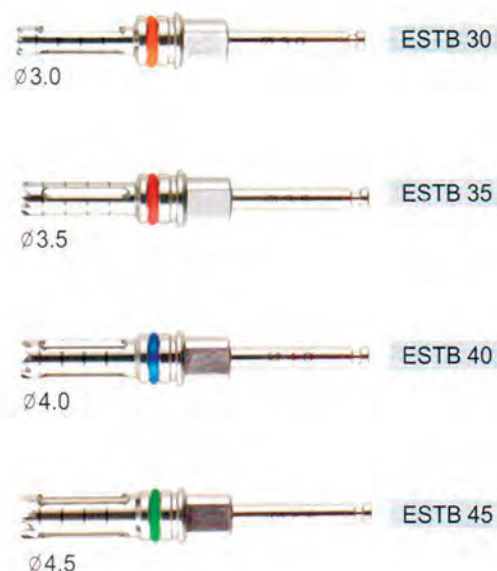

Wrench

Используется механически, соединив с ES римером.



Depth gauge

Инструмент, который измеряет глубину сквозного отверстия.




Stopper set


Состоит из множества размеров, используется, соединив ES ример с трепанной бур.



How to use


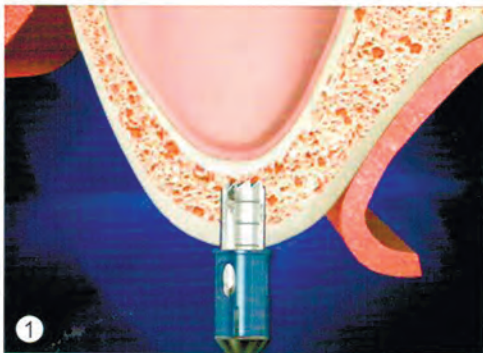


· После определения высоты остаточной кости верхней челюсти с помощью X-Ray перед операцией, соединив стопер, размером в 1 мл меньше остаточной кости, с трепанной бур, начинается сверление. (рекомендуемые обороты трепана бур 800-1000)

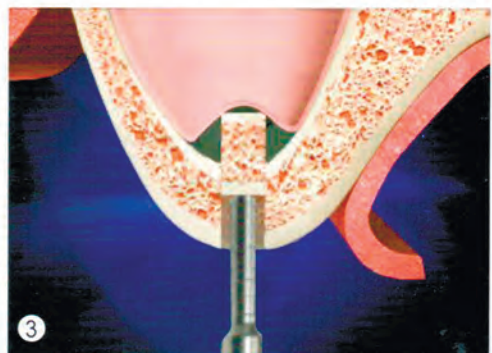

· Используя ES ример, увеличьте глубину внутри синуса. Сдвигая гость, потихоньку поднимите мембрану. (Рекомендуемые обороты ES ример: 20-25/возможно использование гаечного ключа)

· Поднимает кость и стенки пазухи, с помощью молотка для остеотомии.

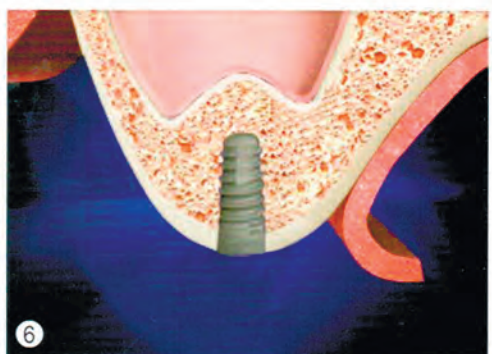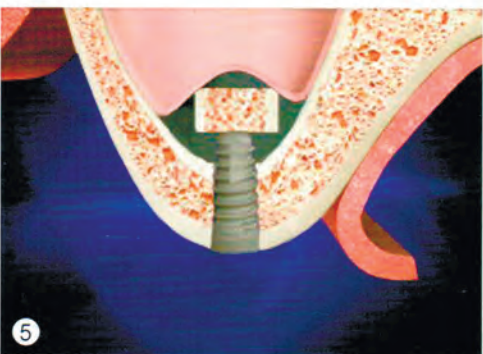


· Установите крепление.

OSTEOTOME SET

S-Set **SD-CONCAVE**

(Вогнутый тип)

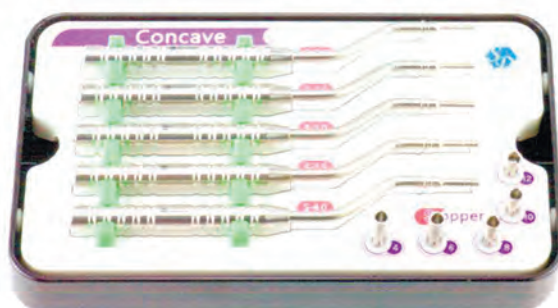

S-2.0



S-2.5



S-3.0




S-3.5



S-4.0

R-Set **SD-CONVEX**

(выпуклый тип)

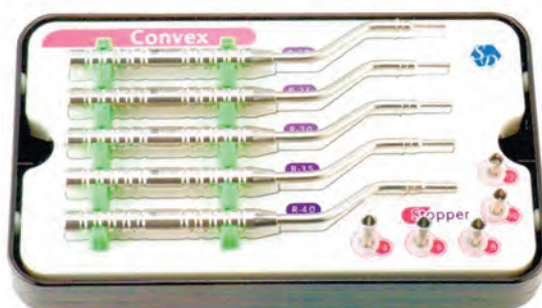

R-2.0



R-2.5



R-3.0



R-3.5





R-4.0



* Набор стопперов есть и в наборе Osteotome S-set, и в R-set.

RIDGE SPLIT-SET SD-RS

Набор инструментов, который используется для открытия узкого хребта кости. Состоит из множества размеров.

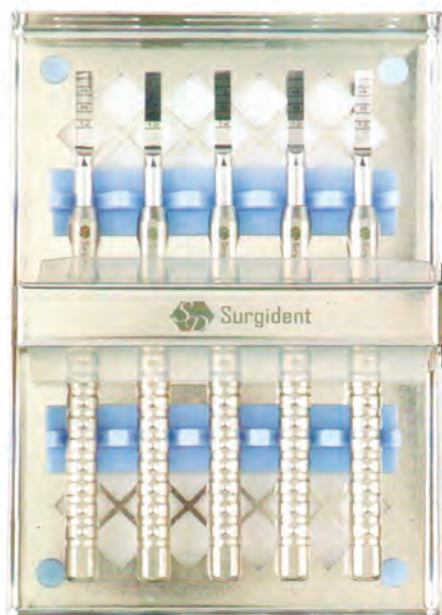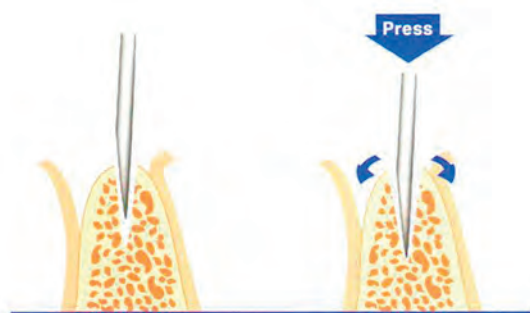

SCL-01



SCL-02



SCL-03



SCL-04



SCL-05

OCHENBEIN CHISEL

Используется при приготовлении костной ткани или ее удалении с помощью Malleting.



CO 1



CO 2




CO 3



BMS SD-BMS : Bone Multi System

После сканирования QR-кода, следует автоматическое распознавание, далее вы можете проверить информацию о продукте и просмотреть видео.

Комбинация наборов инструментов Bone expander kit и Bone spreading kit для пациентов, которые имеют узкую кость при размещении имплантата в разных случаях.

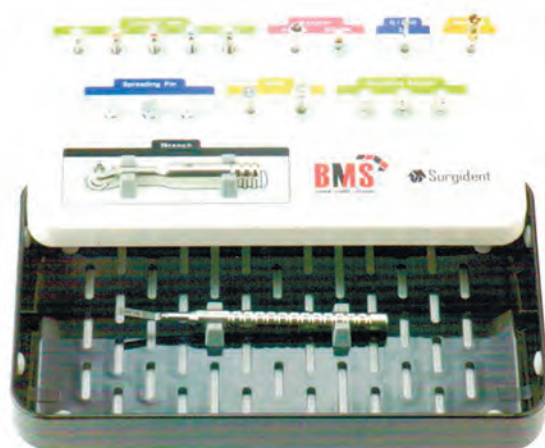

Expander drill

SDEXP-01 SDEXP-02 SDEXP-03 SDEXP-04 SDEXP-05



1.8/2.5 2.0/3.0 2.5/3.5 2.8/4.0 3.0/4.5

Рекомендуемые обороты: 40~50

- Используется при установке 1 имплантата.
- После сверления узкого отверстия, используя дрель Bone expander можно расширить отверстие. (сверление начинается со дрели маленького размера и размер увеличивается)
- Превосходная начальная фиксация. (Пример: при установке имплантата Ø4.5, расширение до Ø4.0 с помощью дрель Expander.)

Saw disk



Handpiece condenser




Guide drill



Wrench



Clinical Case

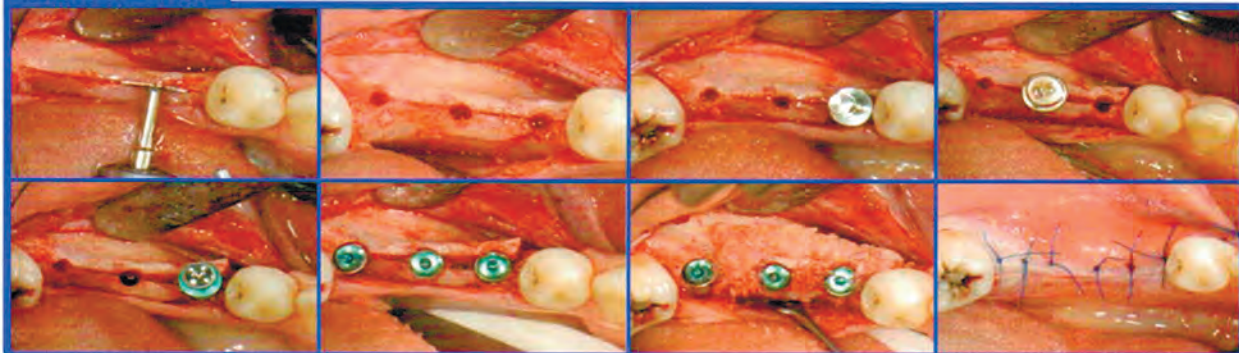

Spreading pin SP-01

Spreading adapter SA-01



* При соединении



• После соединения Spreading конца (раздвигающий) на адаптер, прокрутите налево и расширьте пространство.

Wrench adapter WA-01



• При использовании гаечного ключа и Spreading конца, соедините и используйте.

Splitting chisel



1.0mm / Curved

SCL-05

Never Loss Bone Collector



NLBC-5.0



NLBC-ST5

* Доиспользования



* Послеиспользования



Кость собирается внутри стоппера.

- Сделайте надрез на зоне установке имплантата с помощью дисковой пилы. (после горизонтального надреза, с двух сторон делаются надрезы вертикально)
- Между разделенной костью бок о бок вставляем расширитель. В случае тяжелого процесса вставления, используйте зубило для дробления и после расширения пространства, повторите процесс.
- После установки расширителя отдельно на каждый соедините адаптер расширителя и поверните направо. (Расширитель может работать с помощью гаечного ключа и гаечного адаптера, без своего адаптера.)
- Надо медленно прокручивать 3 расширителя, для одинакового увеличения пространства.
- После расширения пространства уберите расширители и установите крепление. (При устраниении расширителя надо производить замену каждого расширителя на одно крепление и устранять по одному.)
- Заполните имплантатом пространство между креплениями.



* Толщина: 1mm
(Верхний штырь 0.5mm /
Нижний штырь 0.5mm)

Bone Spreading Kit





BONE EXPANDER-KIT SD-BE

После сканирования QR-кода, следует автоматическое распознавание, далее вы можете проверить информацию о продукте и просмотреть видео.

Набор инструментов для расширения кости для пациентов с узким хребтом костного мозга или плохих тканей.



Expander drill

Дрель для расширения пространства для установки имплантата.

SDEXP-01 SDEXP-02 SDEXP-03 SDEXP-04 SDEXP-05



1.8/2.5 2.0/3.0 2.5/3.5 2.8/4.0 3.0/4.5

Рекомендуемые обороты: 40~50

Saw disk

Используется для разреза кости.



SDSAW-09

Handpiece condenser

Дрель для расширения костей соединяется вместе с имплантатом.

SDADP-01



Wrench

Дрель для расширения костей соединяется и используется механически.

SDWRH-00




Guide drill

Для точного определения места установки имплантата используется Guide Hall.

SDGDL-02



Clinical Case

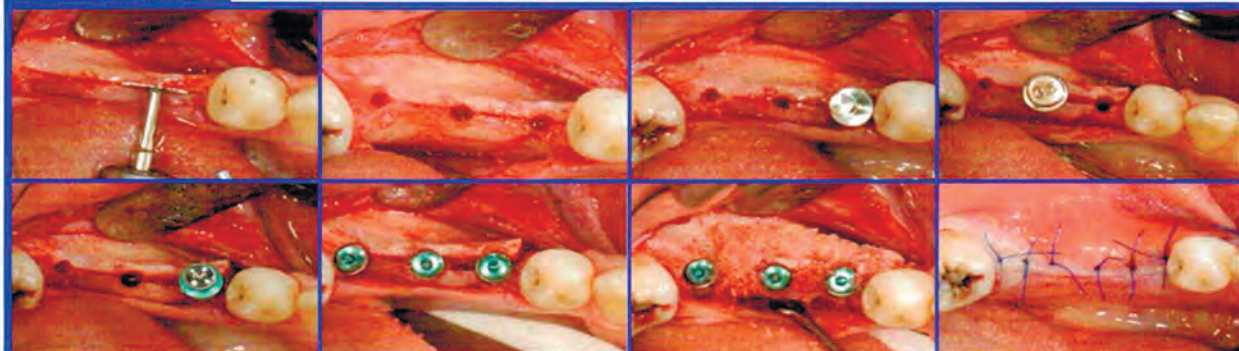



BONE SPREADING-KIT SD-BS

После сканирования QR-кода, следует автоматическое распознавание, далее вы можете проверить информацию о продукте и посмотреть видео.

Набор инструментов для размещения нескольких имплантатов на одной операции для пациентов.



How to use

- Надо разрезать место установки имплантата, используя дисковую пилу.
(после горизонтального разреза, с двух сторон проводятся вертикальные разрезы)
- Между разделенной костью бок о бок вставляем расширитель.
- После соединения своего адаптера на каждый вставленный расширитель, поверните направо.
(Расширитель может работать с помощью гаечного ключа и гаечного адаптера, без своего адаптера.)
- Надо медленно прокручивать 3 расширителя, для одинакового увеличения пространства.
- После расширения пространства уберите расширители и установите крепление.
(При устранении расширителя надо производить замену каждого расширителя на одно крепление и устранять по одному.)
- Заполните имплантатом пространство между креплениями.

Spreading pin SP-01 Spreading adapter SA-01



+



* При соединении



• После соединения расширителя к своему адаптеру, поверните налево и расширьте пространство.

Wrench adapter WA-01

- При использовании гаечного ключа и расширителя нужно использовать, сперва соединив их.



Saw disk

Ø 7.0

SDSAW-07

Ø 9.0

SDSAW-09

Wrench



SDWRH-00

Bone Spreading Kit






TOP-SYSTEM SD-TOP

После сканирования QR-кода, следует автоматическое распознавание, далее вы можете проверить информацию о продукте и посмотреть видео.

Набор инструментов для эффективного использования для различных случаев в имплантации сразу после извлечения.

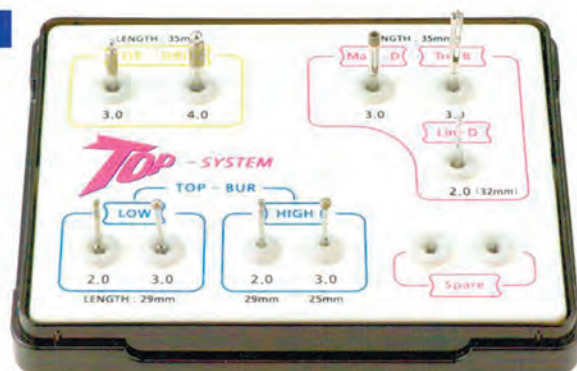

TOP-Bur

· Бур, который используется для удаления мягких тканей и устранения дефектов или воспалительной грануляционной ткани после удаления зуба.
(При применении данного инструмента костная ткань не отскакивает и быстро удаляется.)




TOP-Drill

· Дрель, которая расширяет начальное отверстие до нужного размера.




Marking drill

· Точно маркирует в области септы.
(Инструмент со специальным покрытием из алмазного материала, без скольжений безопасно и точно отмечает место.)

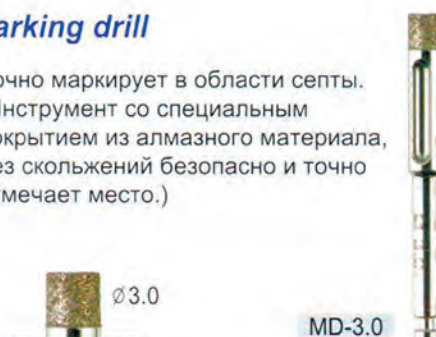

Trephine bur

· Удаляет кость и одновременно создает начальное отверстие.

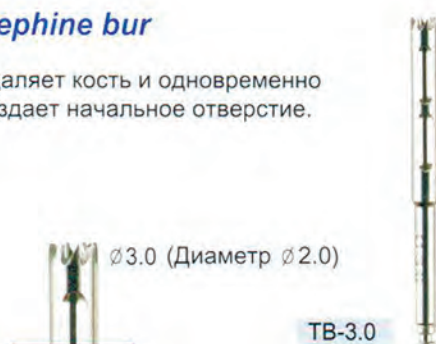

Lindemann drill

· Дрель, которая несмотря на наклон, без скольжений создает отверстие.




TOP-SYSTEM : Surgery case

В случае удаление заднего зуба / В случае наличия септы



1 Удалите грануляционную ткань или мягкую ткань, и т.д., с помощью Топ Бура.


2 Просверлите место установки имплантата с помощью Marking drill.

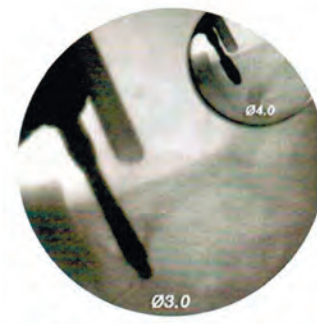

3 Отмеченную зону лечения создайте начальное отверстие с помощью трепана бор.

4 Увеличьте отверстие с помощью Топ Дрель и после последнего сверления установите имплантат.

В случае удалении переднего зуба / В случае отсутствия септы

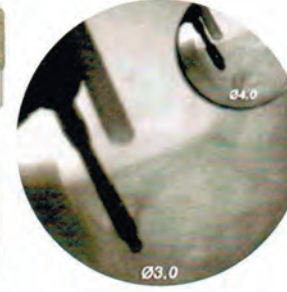

1 Удалите грануляционную ткань или мягкую ткань, и т.д., с помощью Топ Бура.

2 Создайте начальное отверстие с помощью Lindemann сверла.

3 Увеличьте отверстие с помощью Топ Дрель и после последнего сверления установите имплантат.

SD REAMER-SET **SD-CA**

Экономный набор сверл для клиентов, которым интересны дрели для сверления верхней челюсти, который состоит из примера и набора стопперов.



STOP DRILL KIT **SD-SD**

Набор сверл для сверления отверстий на верхней и нижней части челюсти. Продукт, предназначенный для безопасного сверления отверстий с помощью стопперов.



IPD-KIT **SD-IPD**

: IMPLANT PROSTHETIC DRIVER KIT

Набор состоит из разнообразных размеров протезированных драйверов. Также есть и ручной драйвер, и ключ конденсатора.

	Type
Ø 1.2	Osstem
Ø 1.25	Dentium
Ø 1.3	Platon
B/M	Branemark
S/M	Straumann



SD-Reamer



Stopper set



Stop drill



Stopper set



Abutment screw driver



Hand driver




Wrench condenser



TRIMMER-KIT **SD-TR**

Оберточный компостер, трепана бор и дисковая пила разных размеров – это набор аксессуаров.

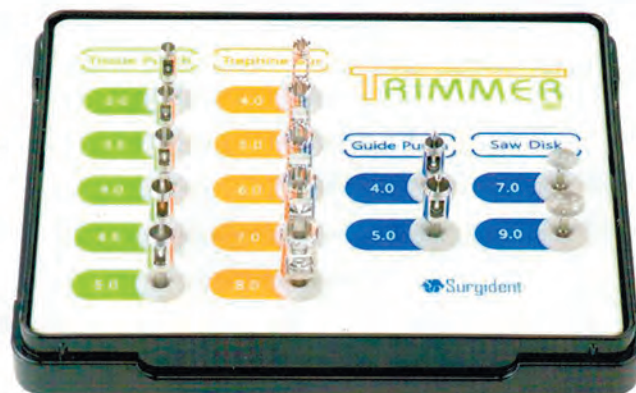

Tissue Punch

Φ 3.0



SDTIS-30

Φ 3.5



SDTIS-35

Φ 4.0



SDTIS-40

Φ 4.5



SDTIS-45

Φ 5.0



SDTIS-50

Trephine bur

Φ 4.0



SDTRB-04

Φ 5.0



SDTRB-05

Φ 6.0



SDTRB-06

Φ 7.0



SDTRB-07

Φ 8.0



SDTRB-08

Guide punch

Φ 4.0



SDGTS-40

Φ 5.0



SDGTS-50

Saw disk

Толщина
0.25mm



Φ 7.0

SDSAW-07

Толщина
0.25mm



Φ 9.0

SDSAW-09



BONE MILL SD-BM

После сканирования QR-кода, следует автоматическое распознавание, далее вы можете проверить информацию о продукте и просмотреть видео.

Минимализация повреждения при дроблении кости

Расширение пространства дробления кости 0,1 мл

Metal Powder Zero

How to assemble and mill



Сбор



- Сборка продукции по порядку от 1 до 5.
- Положить костный блок в пространство для установки, как показано на 4 картинке, и после установки дескриптора, нажмите и прокрутите.
- *Для легкого дробления, рекомендуется использование подходящего размера костного блока.



· Handle



· Body

User manual for harvest milled bone particles



Bone chips

После разделения номера 2 от общего инструмента, используйте раздробленные обломки кости в номер 1.



Bone Pusher


После дробления уберите оставшиеся обломки между пластинами.



P.R.F SYSTEM SD-PRF


: Platelet Rich Fibrin

В центрифуге несколько ПРФ могут быть сделаны одновременно, тем самым сокращая время работы, и сделать желаемую форму!

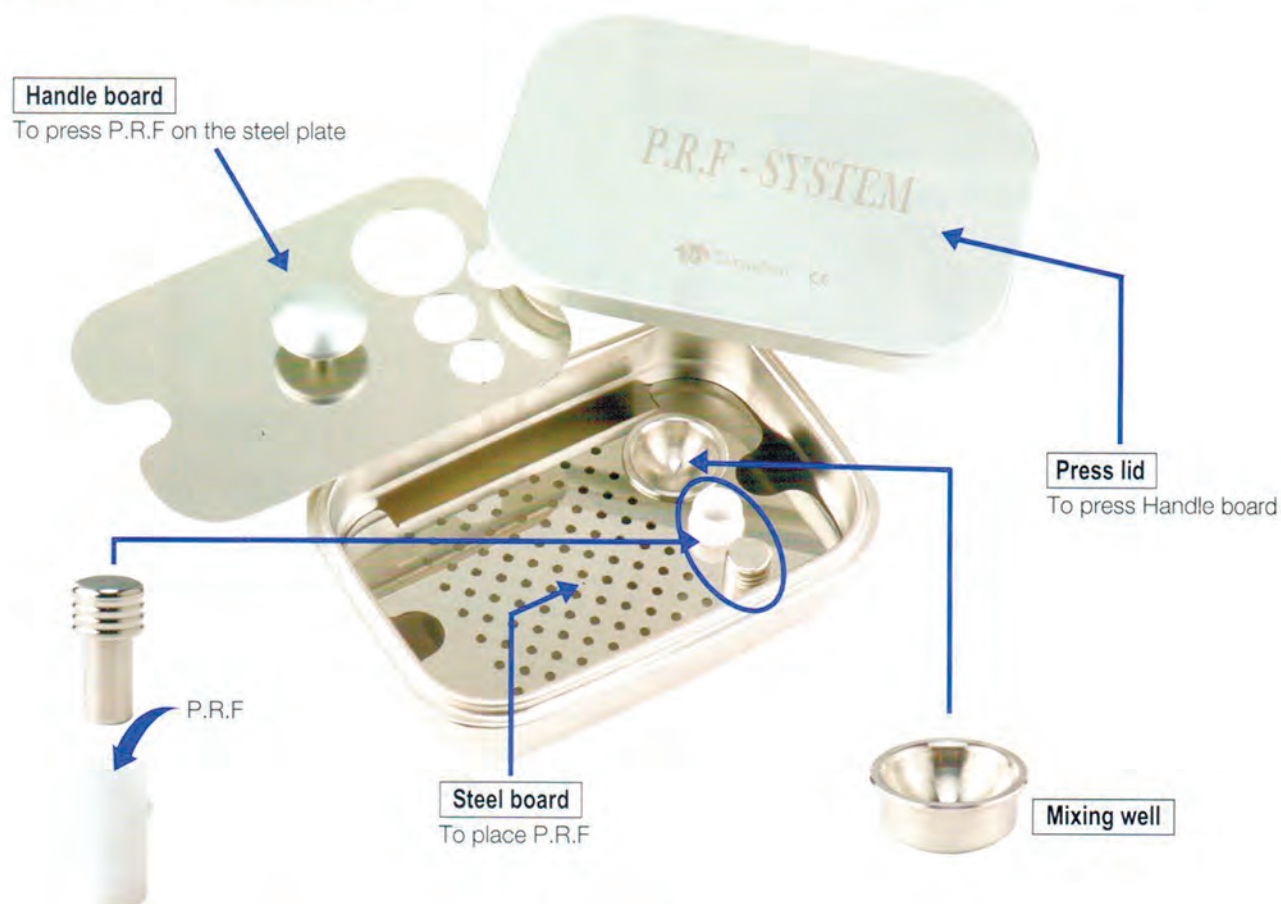


1. Поставить ПРФ наверх стальной доски.

2. Поставить доску с ручкой наверх стальной доски и закрыть пресс-крышкой.

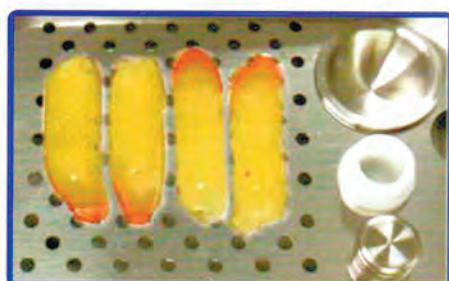

Clots in the PRF-System

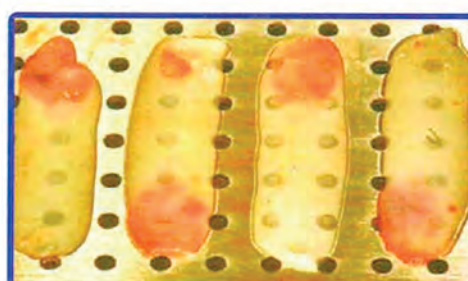

PRF membranes



PRF membrane

BASIC-KIT SD-BK

: Implant surgery package

PES-364 Prichard



PES-362 Molt9



PES-24G P24G



PES-365 Seldin



CO 3 Ochenbein chisel



GR-392 Gracey curette 13-14



SC-345
Lagrange 14cm



SC-342
Iris T/C 11cm



BR-377
Bone rongeur 14cm



TC-336
Towel clamp



HS-339
Hemostats



ND-358
Needle holder T/C 15.5cm



GAG-416
Castro caliper



RC-409
Minnesota retractor



MH-367 Straight



MH-366 Scalpel holder



MIR-407/MIR-407-1 Dental mirror



MT-414 Mallet 16cm



SCT-424 Surgical curette



SCT-421 Surgical curette



BW-428
Bone well



TF-372
Adson 12cm(Saw type)



TF-370-4
Wide pincette



POUCH-01
Green pouch



SUC-02
Titanium suction set-02





 **Surgident**TM



DSS



 shop-dss.ru

☎ +7 (960) 914-01-11
☎ +7 (960) 916-07-05
☎ +7 (905) 078-55-77

✉ dss.42@mail.ru