


КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ БОРЫ

ДЛЯ ВСЕХ СПЕЦИАЛИСТОВ




ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

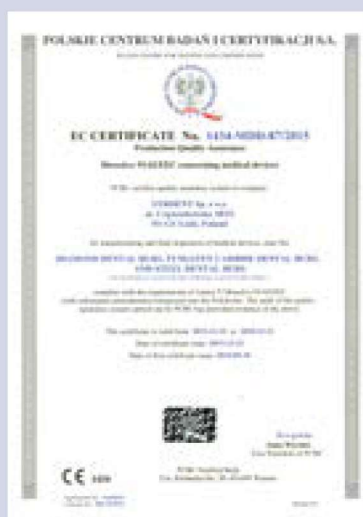

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	2
ОБОЗНАЧЕНИЕ БОРОВ ПО СИСТЕМЕ ИСО /ISO	3
ВИДЫ НАКОНЕЧНИКОВ	3
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ (УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ)	4
КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ	5
АЛМАЗНЫЕ БОРЫ	7
ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ БОРЫ	19
ПОЛИРОВОЧНЫЕ БОРЫ И ФИНИРЫ	23
БОРЫ ДЛЯ РАЗРЕЗАНИЯ КОРОНОК	27
БОРЫ ДЛЯ АМАЛЬГАМЫ	29
БОРЫ ДЛЯ ЭНДОДОНТИИ	31
БОРЫ ДЛЯ ХИРУРГИИ	33
ПОДСТАВКИ ДЛЯ БОРОВ	36
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	37

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для производства боров IQdent
используются станки последнего
поколения и лучшее сырье.

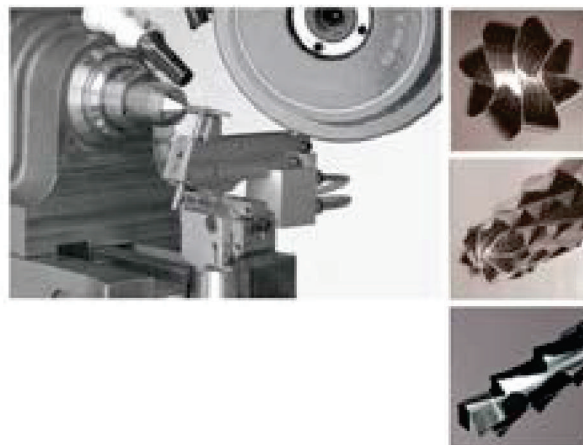

На каждом этапе производства
проводится строгий контроль
качества и проверка
каждого бора



ОБОЗНАЧЕНИЕ БОРОВ ПО СИСТЕМЕ ИСО /ISO/



012.	806.	314.	504.
806. 314. 142. 504. 012Q	806. 314. 142. 504. 012Q	806. 314. 142. 504. 012Q	806. 314. 142. 504. 012Q
Материал рабочей части 806 = Алмазное покрытие, гальваническое крепление	Вид наконечника и общая длина 314 = FG Стандартная длина = 19 mm	Размер зерна 142 = цилиндр 504 = самая мелкая зернистость	Диаметр Диаметр рабочей части в самом широком месте (1/10 мм) 012 = размер 1,2 мм



Q —
ЗОЛОТИСТЫЙ

001.	023.	500.	003.	204.
500. 204. 001. 003. 023	500. 204. 001. 003. 023	500. 204. 001. 003. 023	500. 204. 001. 003. 023	500. 204. 001. 003. 023
Материал рабочей части 500 = твердый сплав	Вид наконечника и общая длина 204 = RA стандартная длина = 22 мм	Форма и вид нарезки 001 = шаровидная 003 = нарезка	Диаметр Диаметр рабочей части в самом широком месте (1/10 мм) 023 = размер 2,3 мм	

ВИДЫ НАКОНЕЧНИКОВ

Обозначение	Наконечник	Длина	Вид	Диаметр
313 FGS	турбинный	короткий		L = 16 мм Ø 1,6 мм
314 FG	турбинный	стандартный		L = 19 мм Ø 1,6 мм
315 FGL	турбинный	длинный		L = 22 мм Ø 1,6 мм
316 FGXL	турбинный	сверхдлинный		L = 25 мм Ø 1,6 мм
204 RA	низкоскоростной	стандартный		L = 22 мм Ø 2,35 мм
205 RAL	низкоскоростной	длинный		L = 26 мм Ø 2,35 мм
206 RAXL	низкоскоростной	сверхдлинный		L = 34 мм Ø 2,35 мм
104 HP	прямой	стандартный		L = 44,5 мм Ø 2,35 мм

ТИП ПОКРЫТИЯ (РАЗМЕР АЛМАЗНОЙ КРОШКИ)

504	● желтый	10-36 µm самая мелкая зернистость	для окончательной полировки
514	● красный	27-76 µm мелкая зернистость	для финишной обработки
524	● синий	64-126 µm средняя зернистость	для стандартной обработки (универсальный)
534	● зеленый	107-181 µm крупная зернистость	для быстрой обработки зубов
544	● черный	151-213 самая крупная зернистость	для очень быстрой обработки зубов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ (УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



ПРОФИЛАКТИКА



ОРТОДОНТИЯ



ХИРУРГИЯ



ИМПЛАНТАЦИЯ



ПРЕПАРИРОВАНИЕ ПОЛОСТИ



УДАЛЕНИЕ ПЛОМБЫ



ПОЛИРОВКА



ПРЕПАРИРОВАНИЕ ПОД КОРОНКУ



РАЗРЕЗАНИЕ КОРОНКИ



ЛЕЧЕНИЕ КАНАЛОВ

УСЛОВИЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ



АВТОКЛАВИРОВАНИЕ 135 °С



ТЕРМИЧЕСКАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ



СТЕРИЛИЗАЦИЯ 180 °С



ХИМИЧЕСКАЯ СТРЕРИЛИЗАЦИЯ



УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЧИСТКА



ЗАМАЧИВАНИЕ В РАСТВОРЕ ПЕРЕД СТЕРИЛИЗАЦИЕЙ

ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ ПО АРТИКУЛАМ IQDENT ИЛИ ISO (ИСО)

I вариант: по ИСО

- Материал рабочей части (например, **806**).
- Наконечник (например, **314**).
- Форма (например, **524**).
- Размер (например, **012**).

Артикул ИСО: **806.314.494.524.012**

II вариант: по артикулу IQdent

- Артикул (например, **802 FG**).
- Размер (например, **012**).

Артикул IQdent: **80L FG 012**

Для заказа золотистых боров к номеру добавьте букву "Q" в конце.

Рисунок в масштабе 1:1

Фотография бора

Общая длина бора

Артикул IQdent

Номер бора по ИСО

697
(80IL)

Длина	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
OAL 22 мм						
314.697.524	80IL FG	010	012	014	016	018
314.697.534	80ILG FG	010	012	014	016	018
314.697.544	80ILSG FG		012	014	016	018

Длина рабочей части

Диаметр

Полный артикул бора

Условные обозначения

Рисунок в масштабе 1:1

Фотография бора

Артикул IQdent

Номер бора по ИСО

CBIS

Размер Ø 1/10 мм	005	006	007	008	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029
RA OAL 22 мм	005		007		010	012	014	016	018	021	023	025	027	029
500 204 001 003 ... CBIS.204														
RAL OAL 26 мм					010	012	014	016	018	021	023			
500 205 001 003 ... CBIS.205														
FG OAL 19 мм		006		008	010	012	014	016	018	021	023			
500 314 001 003 ... CBIS.314														
FG XL OAL 25 мм		006		008	010	012	014	016	018	021	023			
500 316 001 003 ... CBIS.316														

Диаметр

Условные обозначения

Почему Вам понравятся боры IQ dent, когда Вы начнете с ними работать?

- Быстро и эффективно препарируют ткани
- Долгий срок службы благодаря высокому качеству стали и особой методике нанесения алмазного покрытия
- Полный ассортимент
- Доступная стоимость
- Можно собрать набор из любых боров
- Боры имеют различную абразивность



БОЛЕЕ 1000 ВИДОВ БОРОВ!

Боры для терапевтов



Артикул:
801



Артикул:
807

Боры для хирургов



Артикул:
CB165

Боры для эндодонтов



Артикул:
ZEKRYA
(CB151)

Боры для ортопедов



Артикул:
838L



Артикул:
868A

Твердо- сплавные боры



Артикул:
CB1S

Финиры



Артикул:
CF134

Боры для зубных техников



Артикул:
274XGHP060



Артикул:
875 (260)

Боры для разрезания коронки



Артикул:
CB4MCL

Боры для ортодонтон



Артикул:
CF244K




АЛМАЗНЫЕ БОРЫ



Шаровидный

801
(001)

OAL 19mm												
314.001.504	● 801EF FG				O12	O14	O16	O18				
314.001.514	● 801F FG	O07	O08	O10	O12	O14	O16	O18	O21	O23	O25	O35
314.001.524	● 801 FG	O07	O08	O10	O12	O14	O16	O18	O21	O23	O25	O35
314.001.534	● 801G FG			O10	O12	O14	O16	O18	O21	O23	O25	
314.001.544	● 801SG FG				O12	O14	O16	O18	O21	O23	O25	
OAL 16,5 mm												
313.001.524	● 801 FG SHORT					O14		O18				
OAL 25 mm												
316.001.514	● 801F FG XL			O10	O12	O14	O16	O18				
316.001.524	● 801 FG XL			O10	O12	O14	O16	O18			O25	
316.001.534	● 801G FG XL			O10	O12	O14	O16	O18				
316.001.544	● 801SG FG XL				O12	O14	O16	O18				
OAL 22 mm												
204.001.524	● 801 RA			O10	O12	O14	O16	O18	O21	O23	O25	O35
204.001.534	● 801G RA				O12	O14	O16	O18	O21	O23	O25	O35
OAL 26 mm												
205.001.524	● 801 RAL			O10	O12	O14	O16	O18	O21	O23	O25	
205.001.534	● 801G RAL					O14	O16	O18	O21	O23	O25	

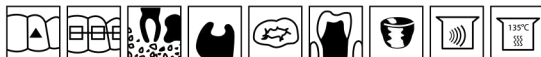

Шаровидный на длинной ножке

801L
(697)

OAL 22 mm						
314.697.524	● 801L FG	O10	O12	O14	O16	O18
314.697.534	● 801LG FG	O10	O12	O14	O16	O18
314.697.544	● 801LSG FG		O12	O14	O16	O18



Шаровидный с воротничком

802
(002)

L mm	3,5	3,5	3,5
OAL 19 mm			
314.002.524	● 802 FG	O14	O16
314.002.534	● 802G FG	O14	O16
314.002.544	● 802SG FG	O14	O16



Бор с безопасным кончиком

388
(388)

L mm	8,0	8,0	8,0	8,0
OAL 22 mm				
314.388.524	● 388 FG	O10	O12	O14
314.388.534	● 388G FG	O10	O12	O14
314.388.544	● 388SG FG	O10	O12	O14



Шаровидный с воротничком на длинной ножке

802L
(404)

L mm	10,0	10,0	10,0	10,0
OAL 22 mm				
314.494.524	● 802L FG	O12	O14	O16
314.494.534	● 802LG FG	O12	O14	O16
314.494.544	● 802LSG FG	O12	O14	O16



504	● желтый	10-36 μm самая мелкая зернистость	для окончательной полировки композита
514	● красный	27-76 μm мелкая зернистость	для финишной обработки
524	● синий	64-126 μm средняя зернистость	для стандартной обработки
534	● зеленый	107-181 μm крупная зернистость	для быстрой обработки зубов
544	● черный	151-213 самая крупная зернистость	для очень быстрой обработки зубов

+7 (960) 914-01-11
+7 (960) 916-07-05
+7 (905) 078-55-77
dss.42@mail.ru






Обратный конус

805
(O12)

L MM		1,0	1,5	1,5	1,5	2,3	2,3
OAL 19mm							
314.012.514	● 805F FG	O10	O12	O14	O16		
314.012.524	● 805 FG	O10	O12	O14	O16	O18	O21
314.012.534	● 805G FG			O14	O16	O18	
314.012.544	● 805SG FG			O14	O16	O18	O21
OAL 16,5mm							
313.012.524	● 805 FG SHORT	O10		O14			

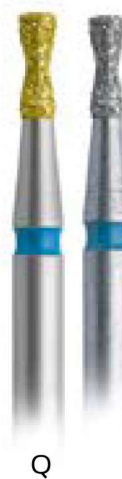

Обратный конус
с воротничком

806
(O19)

L MM		3,0	3,0
OAL 19 mm			
314.019.514	● 806F FG	O12	
314.019.524	● 806 FG	O12	O14
314.019.534	● 806G FG	O12	O14
314.019.544	● 806SG FG		O14



Обратный конус
удлиненный

807
(225)

L MM		3,5	3,5	4,0	4,0
OAL 19mm					
314.225.514	● 807F FG	O12	O14	O16	O18
314.225.524	● 807 FG	O12	O14	O16	O18
314.225.534	● 807G FG	O12	O14	O16	O18
314.225.544	● 807SG FG		O14	O16	O18
OAL 22mm					
204.225.524	● 807 RA				O18



Грушевидный

808R
(237)


L MM		5,0	5,0	5,0	5,0
OAL 19mm					
314.238.514	● 808RF FG	O10	O12	O14	O16
314.238.524	● 808R FG	O10	O12	O14	O16
314.238.534	● 808RG FG			O14	O16



Грушевидный
удлиненный

808RL
(24Q)

L mm		5,0	5,0
● 808RLF FG	O14	O18	
● 808RL FG	O14	O18	
● 808RLG FG	O14	O18	
● 808RLSG FG	O14	O18	

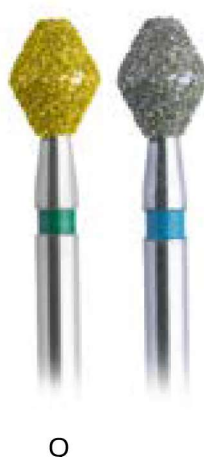

Ромбовидный

811
(O38)

L MM		4,0
OAL 19 mm		
314.038.514	● 811F FG	O33
314.038.524	● 811 FG	O33
314.038.534	● 811G FG	O33
314.038.544	● 811SG FG	O33



АЛМАЗНЫЕ БОРЫ



Ромбовидный
удлиненный

811L
(039)

L MM		7,0
OAL 22 MM		
314.039.514	● 811LF FG	O37
314.039.524	● 811L FG	O37
314.039.534	● 811LG FG	O37
314.039.544	● 811LSG FG	O37



Q



Колесовидный

815
(040)

L MM		0,5	0,5
OAL 19 MM			
314.040.524	● 815 FG	O18	
OAL 22 MM			
204.040.524	● 815 RA		O35



Конус
с вогнутыми
сторонами

820
(465)

L MM		5,0	5,9
OAL 19 MM			
314.465.514	● 820F FG	O16	O18
314.465.524	● 820 FG	O16	O18



Q



Куполообразный

829
(463)

L MM		2,1
OAL 19 MM		
314.464.504	● 829F FG	O25
314.464.514	● 829 FG	O25



Бутон
стандартный

830
(257)

L MM		4,5	4,5	4,5	4,5	5,0	5,0
OAL 19 MM							
314.257.504	● 830EF FG	O12	O14	O16	O18	O21	O23
314.257.514	● 830F FG	O12	O14	O16	O18	O21	O23
314.257.524	● 830 FG	O12	O14	O16	O18	O21	O23
314.257.534	● 830G FG	O12	O14	O16	O18	O21	O23
314.257.544	● 830SG FG	O12	O14	O16	O18	O21	O23



Q



Бутон
остроконечный

827
(464)

L MM		4,0
OAL 19 MM		
314.464.504	● 827EF FG	O18
314.464.514	● 827F FG	O18



Q



Бутон
малый

831
(254)

L MM	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0
OAL 19 mm					
314.254.504	● 831EF FG	O14	O16	O18	O21
314.254.514	● 831F FG	O14	O16	O18	O21
314.254.524	● 831 FG	O14	O16	O18	O21
314.254.534	● 831G FG	O14	O16	O18	O21
314.254.544	● 831SG FG	O14	O16	O18	O21



Плоский

839R
(179)

L MM	0,2	0,2	0,2
OAL 19 mm			
● 839R FG	O12	O14	O16



Олива

833
(277)


L MM	2,8	2,8	3,4	3,4	4,1	4,2	4,6
OAL 19 mm							
314.277.504	● 833EF FG	O12	O14	O16	O18	O21	O23
314.277.514	● 833F FG	O12	O14	O16	O18	O21	O23
314.277.524	● 833 FG	O12	O14	O16	O18	O21	O23
314.277.534	● 833G FG	O12	O14	O16	O18	O21	O23
314.277.544	● 833SG FG	O12	O14	O16	O18	O21	O23
OAL 22 mm							
204.277.514	● 833F RA				O18	O23	
204.277.524	● 833 RA				O18	O23	



Маркер глубины
прямой

834
(834)

глубина метки T	0,3 мм	0,4 мм	0,5 мм
L MM	7,0	7,0	7,0
OAL 22 mm			
314.834.524	● 834 FG	O16	O18

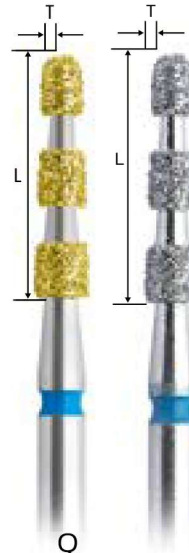


Маркер глубины
конус

868A
(868A)

глубина метки T	0,3 мм
L MM	7,0
OAL 22 mm	
314.868A.524	● 868A FG



АЛМАЗНЫЕ БОРЫ

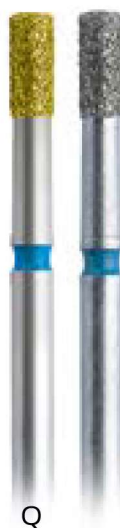

Цилиндр
с плоским концом
короткий
835
(108)

L MM		3,0	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5
OAL 19 MM							
314.108.504	● 835EF FG				O12	O14	O16
314.108.514	● 835F FG	O06	O08	O10	O12	O14	
314.108.524	● 835 FG	O06	O08	O10	O12	O14	O16
314.108.534	● 835G FG	O06	O08	O10	O12	O14	O16
314.108.544	● 835SG FG			O10	O12	O14	O16
OAL 16,5 MM							
313.108.524	● 835 FG SHORT				O12		
313.108.534	● 835G FG SHORT				O12		
OAL 22 MM							
204.108.524	● 835 RA				O12		



Цилиндр
длинный
837L
(111)

L MM		8,0	8,0	8,0	8,0
OAL 22 MM					
314.111.504	● 837LEF FG	O10	O12	O14	
314.111.514	● 837LF FG	O10	O12	O14	O16
314.111.524	● 837L FG	O10	O12	O14	O16
314.111.534	● 837LG FG		O12	O14	O16
314.111.544	● 837LSG FG		O12	O14	O16
OAL 22 MM					
204.111.524	● 837L RA			O14	



Цилиндр
с закругленным концом
длинный
838L
(140)

L MM		6,0	6,0	6,0
OAL 19 MM				
314.140.504	● 838LEF FG	O10	O12	O14
314.140.514	● 838LF FG	O10	O12	O14
314.140.524	● 838L FG	O10	O12	O14
314.140.534	● 838LG FG	O10	O12	O14



Цилиндр
с плоским концом средний
837
(110)

L MM		6,0	6,0	6,0	6,0
OAL 19 MM					
314.110.504	● 837EF FG	O10	O12	O14	
314.110.514	● 837F FG	O10	O12	O14	O16
314.110.524	● 837 FG	O10	O12	O14	O16
314.110.534	● 837G FG	O10	O12	O14	O16
314.110.544	● 837SG FG		O12	O14	O16



Цилиндр
сверхдлинный
837XL
(112)

L MM		10,0	10,0
OAL 24 MM			
314.111.514	● 837XLF FG	O12	O14
314.111.524	● 837XL FG	O12	O14
314.111.534	● 837XLG FG	O12	O14



Конус
с плоским концом
короткий
846
(171)

L MM		6,0	6,0	6,0	6,0
OAL 22 MM					
314.171.514	● 846F FG	O12	O14	O16	O18
314.171.524	● 846 FG	O12	O14	O16	O18
314.171.534	● 846G FG	O12	O14	O16	O18
314.171.544	● 846SG FG		O14	O16	O18





Конус
с плоским концом
средний

847
(172)

L MM	8,0	8,0	8,0	8,0
OAL 22 mm				
314.172.514	● 847F FG	O12	O14	O16
314.172.524	● 847 FG	O12	O14	O16
314.172.534	● 847G FG	O12	O14	O16
314.172.544	● 847SG FG	O12	O14	O16



Конус
с плоским концом
длинный

848
(173)

L MM	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
OAL 24 mm						
314.173.504	● 848EF FG	O12	O14	O16	O18	
314.173.514	● 848F FG	O12	O14	O16	O18	O21
314.173.524	● 848 FG	O12	O14	O16	O18	O21
314.173.534	● 848G FG	O12	O14	O16	O18	O21
314.173.544	● 848SG FG	O12	O14	O16	O18	



Конус
с круглым концом
короткий

849
(197)


L MM	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	7,0
OAL 22 mm						
314.197.514	● 849F FG	O10	O12	O14	O16	O18
314.197.524	● 849 FG	O10	O12	O14	O16	O18
314.197.534	● 849G FG	O10	O12	O14	O16	O18
314.197.544	● 849SG FG		O12	O14	O16	O18



Конус
с круглым концом
средний

850
(198)

L MM	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
OAL 22 mm							
314.198.514	● 850F FG	O10	O12	O14	O16	O18	O21
314.198.524	● 850 FG	O10	O12	O14	O16	O18	O21
314.198.534	● 850G FG	O10	O12	O14	O16	O18	O21
314.198.544	● 850SG FG		O12	O14	O16	O18	O21

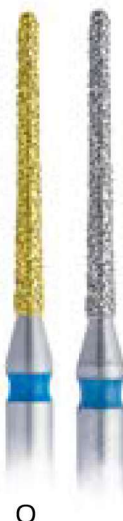

Конус
с круглым концом
длинный

852
(199)

L MM	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
OAL 24mm							
314.199.504	● 852EF FG	O10	O12	O14	O16	O18	
314.199.514	● 852F FG	O10	O12	O14	O16	O18	O23
314.199.524	● 852 FG	O10	O12	O14	O16	O18	O23
314.199.534	● 852G FG		O12	O14	O16	O18	O23
314.199.544	● 852SG FG		O12	O14	O16	O18	



Безопасный кончик
Конус
атравматичный

857
(220)

L MM	10,0
OAL 24 mm	
314.220.514	● 857F FG
314.220.524	● 857 FG
314.220.534	● 857G FG



АЛМАЗНЫЕ БОРЫ

Игловидный средний

858
(165)

L MM		8,0	8,0	8,0	8,0
OAL 24 MM					
314.165.504	858EF FG	O10	O12	O14	O16
314.165.514	858F FG	O10	O12	O14	O16
314.165.524	858 FG	O10	O12	O14	O16
314.165.534	858G FG	O10	O12	O14	O16
314.165.544	858SG FG			O14	O16
OAL 24 MM					
314.165.514	858F RA			O14	
314.165.524	858 RA			O14	



Игловидный длинный

859
(166)

L MM		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
OAL 24 MM						
314.166.504	859EF FG	O10	O12	O14	O16	O18
314.166.514	859F FG	O10	O12	O14	O16	O18
314.166.524	859 FG	O10	O12	O14	O16	O18
314.166.534	859G FG	O10	O12	O14	O16	O18
314.166.544	859SG FG			O14	O16	O18
OAL 24 MM						
314.166.524	859 RA	O10		O14		



Игловидный сверхдлинный

859L
(167)

L MM		11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
OAL 26 MM						
314.167.504	859LEF FG	O10	O12	O14	O16	O18
314.167.514	859LF FG	O10	O12	O14	O16	O18
314.167.524	859L FG	O10	O12	O14	O16	O18
314.167.534	859LG FG	O10	O12	O14	O16	O18
314.167.544	859LSG FG			O14	O16	O18



Пламевидный короткий

860
(243)

L MM		3,0	3,0	5,0	5,0	5,0
OAL 19 MM						
314.243.504	860EF FG	O10	O12	O18	O23	O25
314.243.514	860F FG	O10	O12	O18	O23	O25
314.243.524	860 FG	O10	O12	O18	O23	O25
314.243.534	860G FG	O10	O12	O18	O23	O25
314.243.544	860SG FG		O12	O18	O23	O25
OAL 16,5 MM						
313.243.524	860 FG SHORT		O12			



Пламевидный средний

862
(249)

L MM		8,0	8,0	8,0	8,0
OAL 22 MM					
314.249.504	862EF FG	O10	O12	O14	O16
314.249.514	862F FG	O10	O12	O14	O16
314.249.524	862 FG	O10	O12	O14	O16
314.249.534	862G FG		O12	O14	O16
314.249.544	862SG FG		O12	O14	O16



Пламевидный длинный

863
(250)

L MM		10,0	10,0	10,0	10,0
OAL 24 MM					
314.250.504	863EF FG	O12	O14	O16	O18
314.250.514	863F FG	O12	O14	O16	O18
314.250.524	863 FG	O12	O14	O16	O18
314.250.534	863G FG	O12	O14	O16	O18
314.250.544	863SG FG	O12	O14	O16	O18



ТИП ПОКРЫТИЯ	504	514	524	534	544
	желтый	красный	синий	зеленый	черный
	10-36 µm самая мелкая зернистость	27-76 µm мелкая зернистость	64-126 µm средняя зернистость	107-181 µm крупная зернистость	151-213 самая крупная зернистость
	для окончательной полировки композита				
	для финишной обработки				
	для стандартной обработки				
	для быстрой обработки зубов				
	для очень быстрой обработки зубов				

+7 (960) 914-01-11
+7 (960) 916-07-05
+7 (905) 078-55-77
dss.42@mail.ru





Пламевидный сверхдлинный

863L
(251)

L mm		11,5	11,5	11,5
OAL 26 mm				
314.251.504	● 863LEF FG	O14	O16	O18
314.251.514	● 863LF FG	O14	O16	O18
314.251.524	● 863L FG	O14	O16	O18
314.251.534	● 863LG FG	O14	O16	O18
314.251.544	● 863LSG FG	O14	O16	O18



Цилиндр
с закругленным концом
на длинной ножке

865L
(251)

L mm		3,0
OAL 26 mm		
314.251.504	● 865LF FG	009
314.251.514	● 865L FG	009



Цилиндр
торпедовидный

869
(290)

L mm		10,0	10,0	10,0	10,0
OAL 24 mm					
314.290.504	● 869EF FG	O10	O12	O14	O16
314.290.514	● 869F FG	O10	O12	O14	O16
314.290.524	● 869 FG	O10	O12	O14	O16
314.290.534	● 869G FG		O12	O14	O16
314.290.544	● 869SG FG			O14	O16



Цилиндр
торпедовидный
длинный

869L
(291)

L mm		11,5	11,5	11,5
OAL 26 mm				
314.291.514	● 869LF FG	O12	O14	O16
314.291.524	● 869L FG	O12	O14	O16
314.291.534	● 869LG FG	O12	O14	O16



Песочные часы

870
(032)

L mm		1,5	1,9
OAL 19 mm			
314.032.524	● 870 FG	O14	O18
314.032.534	● 870G FG	O14	O18
314.032.544	● 870SG FG	O14	O18



Цилиндр закругленный

881
(141)

L mm		8,0	8,0	8,0	8,0
OAL 22 mm					
314.141.514	● 881F FG	O10	O12	O14	O16
314.141.524	● 881 FG	O10	O12	O14	O16
314.141.534	● 881G FG	O10	O12	O14	O16
314.141.544	● 881SG FG		O12	O14	O16



АЛМАЗНЫЕ БОРЫ



Цилиндр закругленный
длинный

882
(142)

L MM	10,0	10,0	10,0
OAL 24 mm			
314.142.514	● 882F FG	O12	O14 O16
314.142.524	● 882 FG	O12	O14 O16
314.142.534	● 882G FG	O12	O14 O16
314.142.544	● 882SG FG	O12	O14 O16



Q



Цилиндр
остроконечный

885
(130)

L MM	8,0	8,0	8,0	8,0
OAL 22 mm				
314.130.504	● 885EF FG	O10	O12	O14
314.130.514	● 885F FG	O10	O12	O14 O16
314.130.524	● 885 FG	O10	O12	O14 O16
314.130.534	● 885G FG		O12	O14 O16
314.130.544	● 885SG FG		O12	O14 O16



Q



Цилиндр остроконечный
длинный

886
(131)

L MM	10,0	10,0	10,0
OAL 24 mm			
314.131.504	● 886EF FG	O12	O14 O16
314.131.514	● 886F FG	O12	O14 O16
314.131.524	● 886 FG	O12	O14 O16
314.131.534	● 886G FG	O12	O14 O16
314.131.544	● 886SG FG		O14 O16



Q



Плачевидный
на длинной ножке

888L
(539)

L MM		3,0
OAL 22 MM		
314.539.514	● 888L FFG	O10
314.539.524	● 888L FG	O10
314.539.534	● 888LG FG	O10



Q



Плачевидный
на длинной ножке
длинный

889L
(540)

L MM	4,0	4,0
OAL 22 mm		
314.540.514	● 889LF FG	O09 O10
314.540.524	● 889L FG	O09 O10
314.540.534	● 889LG FG	O09 O10



Q



Плачевидный тонкий

890
(160)

L MM	4,0	4,0
OAL 22 mm		
314.160.514	● 890F FG	O08 O10
314.160.524	● 890 FG	O08 O10



Q

Пламевидный
тонкий

890L
(699)

L MM	4,0
OAL 22 MM	
314.699.514	● 890LF FG 008
314.699.524	● 890L FG 008



Цилиндр длинный

891
(113)

L MM	12,0
OAL 26 MM	
314.113.514	● 891F FG 014
314.113.524	● 891 FG 014
314.113.534	● 891G FG 014
314.113.544	● 891SG FG 014



Груша

893
(507)

L MM	5,8	5,8
OAL 22 MM		
314.507.514	● 893F FG 018	023
314.507.524	● 893 FG 018	023
314.507.534	● 893G FG 018	023
314.507.544	● 893SG FG 018	023



Конусный

898
(164)

L MM	6,0	6,0	6,0	6,0
OAL 22 MM				
314.164.504	● 898EF FG 010	012	014	016
314.164.514	● 898F FG 010	012	014	016
314.164.524	● 898 FG 010	012	014	016
314.164.534	● 898G FG 012	014	016	
314.164.544	● 898SG FG 014	016		



Пламевидный толстый

895
(274)

L mm	3,5	4,0	5,0	5,0
OAL 22 MM				
● 895 FG	008	010	012	014



Веретенообразный

899
(033)

L MM	6,5
OAL 22 MM	
314.033.524	● 899 FG 021
314.033.534	● 899G FG 021



Направляющий пин

Конусный
для уступа

508
(508)

L MM	8,0	8,0
OAL 24 MM		
314.508.514	● 508F FG 018	021
314.508.524	● 508 FG 018	021
314.508.534	● 508G FG 018	021
314.508.544	● 508SG FG 018	021



АЛМАЗНЫЕ МИКРОБОРЫ



Шаровидный
миниатюрный

697

L мм		0,7
OAL 19 мм		
314.697.514	● 80IF FG	007
314.697.524	● 80I FG	007



Грушевидный
миниатюрный

277

L мм		1,1
OAL 19 мм		
314.277.514	● 833F FG	009
314.277.524	● 833 FG	009



Цилиндрический
закругленный

698

L мм		3,0
OAL 19 мм		
314.698.514	● 838F FG	007
314.698.524	● 838 FG	007



Цилиндрический
закругленный тонкий

138

L мм		3,6
OAL 19 мм		
314.138.514	● 880F FG	007
314.138.524	● 880 FG	007



Пламевидный

194

L мм		2,1
OAL 19 мм		
314.194.514	● 889F FG	007
314.194.524	● 889 FG	007



Конусный

540

L мм		3,6
OAL 19 мм		
314.540.514	● 890F FG	007
314.540.524	● 890 FG	007



Пламевидный

271

L мм		2,1
OAL 19 мм		
314.271.514	● 895F FG	007
314.271.524	● 895 FG	007



Пламевидный

295




L мм		3,6
OAL 19 мм		
314.295.514	● 896F FG	007
314.295.524	● 896 FG	007





ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ БОРЫ



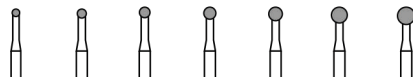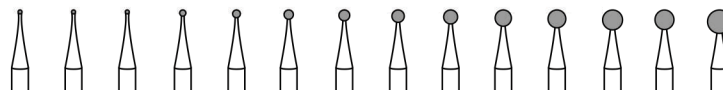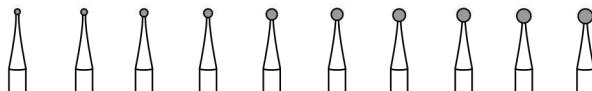



Цилиндрический
с плоским концом

CB21

Размер Ø 1/10 мм	008	010	012	014
L мм	3,4	3,4	4,2	4,2
FG	OAL 19 мм			
500 314 107 006 ...	CB21.314			



Цилиндрический
с плоским концом
длинный

CB21L

Размер Ø 1/10 мм	010	012
L мм	6,0	6,0
FG	OAL 19 мм	
500 314 110 006 ...	CB21L.314	



Конусовидный
с плоским концом

CB23

Размер Ø 1/10 мм	008	009	010	012
L мм	3,6	3,8	4,1	4,1
FG	OAL 19 мм			
500 314 168 006 ...	CB23.314			



Конусовидный
с плоским концом
длинный

CB23L

Размер Ø 1/10 мм	009	010	012
L мм	5,3	6,3	6,3
FG	OAL 19 мм		
500 314 171 006 ...	CB23L.314		



Обратноконусный

CB2

Размер Ø 1/10 мм	008	010	012	014	016	018
L мм	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8
RA	OAL 22 мм					
500 204 010 006 ...	CB2.204					
FG	OAL 19 мм					
500 314 010 006 ...	CB2.314					



Цилиндрический
закругленный

CB7L

Размер Ø 1/10 мм	008	010	012	014
L мм	3,6	4,1	4,1	4,4
FG	OAL 19 мм			
500 314 234 006 ...	CB7L.314			



ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ БОРЫ

Цилиндрический
с закругленным
концом короткий

CB7

Size/Medida/Размер Ø 1/10 мм	006	008	010	012
L мм	1,7	1,8	2,0	2,2
FG	OAL 19 мм			
500 314 237 001 ... CB7.314	006	008	010	012



Цилиндрический
с закругленным
концом длинный

CB7S

Размер Ø 1/10 мм	010	012
L мм	1,7	1,8
FG		
500 314 232 003 ... CB7S.314	010	012



Цилиндрический
зубчатый

CB31

Размер Ø 1/10 мм	010	012
L мм	4,1	4,1
FG	OAL 19 мм	
500 314 107 007 ... CB31.314	010	012



Цилиндрический
зубчатый длинный

CB31L

Размер Ø 1/10 мм	010	012
L мм	6,3	6,3
FG	OAL 19 мм	
500 314 110 007 ... CB31L.314	010	012



Конусовидный
зубчатый

CB33

Размер Ø 1/10 мм	010	012
L мм	4,1	4,1
FG	OAL 19 мм	
500 314 168 007 ... CB33.314	010	012



Конусовидный
зубчатый длинный

CB33L

Размер Ø 1/10 мм	010	012
L мм	6,3	6,3
FG	OAL 19 мм	
500 314 171 007 ... CB33L.314	010	012





ПОЛИРОВОЧНЫЕ БОРЫ И ФИНИРЫ



Конус

Безопасный
кончик

CF132

Размер Ø 1/10 мм	008
L мм	3,0
OAL 22 мм	
CF132 FG 500 314 699 071 ...	008
CF132F FG 500 314 699 041 ...	008
CF132UF FG 500 314 699 031 ...	008



Конус

Безопасный
кончик

CF133

Размер Ø 1/10 мм	008
L мм	4,0
OAL 19 мм	
CF133 FG 500 314 159 071 ...	010
CF133F FG 500 314 159 041 ...	010
CF133UF FG 500 314 159 031 ...	010



Конус

Безопасный
кончик

CF135

Размер Ø 1/10 мм	014
L мм	9,0
OAL 25 мм	
CF135 FG 500 314 166 071 ...	014
CF135F FG 500 314 166 041 ...	014
CF135UF FG 500 314 166 031 ...	014



Конус

Безопасный
кончик

CF134

Размер Ø 1/10 мм	014
L мм	6,0
OAL 22 мм	
CF134 FG 500 314 164 071 ...	014
CF134F FG 500 314 164 041 ...	014
CF134UF FG 500 314 164 031 ...	014



Шаровидный

CF41

Размер Ø 1/10 мм	014	018	023
OAL 19 мм			
CF41 FG 500 314 001 071 ...	014	018	023



Пулевидный

CF46

Размер Ø 1/10 мм	014
L мм	3,5
OAL 19 мм	
CF46 FG 500 314 254 072 ...	014



Обратноконусный
закругленный

CF47L

Размер Ø 1/10 мм	012	014	граней
L мм	4,0	4,0	
CF47L FG 500 234 072 ...	012	014	8-12



Пламевидный длинный

CF48L

Размер Ø 1/10 мм	010	012
L мм	8,0	8,0
OAL 22 мм		
CF48L FG 500 314 249 072 ...	010	012
CF48LF FG 500 314 249 042 ...	010	012
CF48LUF FG 500 314 249 032 ...	010	012



Для удаления клея (цемента)
после снятия брекетов

CF244K

Размер Ø 1/10 мм	021
L мм	8,0
OAL 26 мм	
CF 244K RA 500 204 298 072 021	014



Пламевидный короткий

CF246

Размер Ø 1/10 мм	009	010	012
L мм	3,6	3,6	3,6
OAL 19 мм			
CF 246 FG 500 314 495 071 ...	009	010	012
CF 246UF FG 500 314 495 031 ...	009		



Конус закругленный

CF247

Размер Ø 1/10 мм	009	012
L мм	3,2	3,4
OAL 22 мм		
CF247 FG 500 314 195 071 ...		012
CF247F FG 500 314 195 041 ...	009	



Торпеда

CF283

Размер Ø 1/10 мм	012	014
L мм	8,0	8,0
OAL 22 мм		
CF 283 FG 500 314 289 072 ...	012	014



Торпеда

CF284

Размер Ø 1/10 мм	014
L мм	10,0
OAL 25 мм	
CF 284 FG 500 314 290 072 ...	014



Олива

CF379

Размер Ø 1/10 мм	014	018	023
L мм	3,1	3,5	4,2
OAL 19 мм			
CF 379 FG 500 314 277 072	014	018	023
CF 379F FG 500 314 277 042	014	018	023
CF 379UF FG 500 314 277 032	014	018	023
OAL 22 мм			
CF 379 RA 500 204 277 072		018	023



Олива

CF390

L мм	3,5	3,6
OAL 19 мм		
CF 390 FG 500 314 274 072 ...	016	018
CF 390F FG 500 314 274 042 ...	016	
CF 390UF FG 500 314 274 032 ...	016	018





БОРЫ ДЛЯ РАЗРЕЗАНИЯ КОРОНОК




БОРЫ ДЛЯ РАЗРЕЗАНИЯ КОРОНОК



Бор для разрезания
металла, керамики
и цемента

CB5CK

Размер Ø 1/10 мм	012	014
L мм	4,0	4,0
FG OAL 19 мм	012	014
500 314 194 019 ... CB5CK.314		

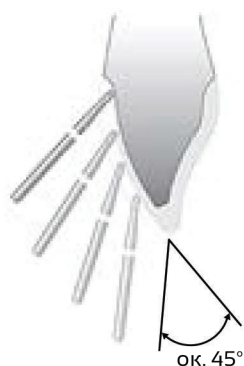

Бор для разрезания
металла, керамики
и цемента

CB4MCL

Размер Ø 1/10 мм	012	014
L мм	4,0	4,0
FG OAL 19 мм	012	014
500 314 139 019 ... CB4MCL.314		



CB35C

Размер Ø 1/10 мм	012
L мм	2,0
FG OAL 19 мм	012
500 314 138 008 ... CB35C.314	



CB37

Размер Ø 1/10 мм	012
L мм	3,5
FG OAL 19 мм	012
500 314 139 008 ... CB37.314	






БОР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ АМАЛЬГАМЫ



БОР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ АМАЛЬГАМЫ



- Максимальная защита во время препарирования.
- Низкое сопротивление амальгамы при введении бора.
- Слегка конусная форма для сохранения тканей зуба.
- Большие пространства между лезвиями для эффективного удаления частиц амальгамы
- Только для работы в амальгаме, не вызывает побочного эффекта в виде паров ртути.
- Специально сконструированное острие исключает возможность защемления инструмента во время работы.

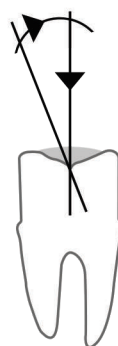

CB21RMX

Размер Ø 1/10 мм	012
L мм	4,2
FG	OAL 19 мм
500 314 137 006 ... CB21RMX.314	012



БОРЫ ДЛЯ ЭНДОДОНТИИ

БОРЫ ДЛЯ ЭНДОДОНТИИ

GATES

Размер Ø 1/10 мм	050	070	090	110	130	150
180GRF 15мм 330 205 679 336...	050	070	090	110	130	150
180GRF 15мм 330 205 679 336...	SET (050-150)					
180GRF 19мм 330 206 679 336...	050	070	090	110	130	150
180GRF 19мм 330 206 679 336...	SET (050-150)					



MULLER

Размер Ø 1/10 мм	090	100	120	140	160	180
191RF 18мм 330 206 698 001...	090	100	120	140	160	180
191RF 18мм 330 206 698 001...	SET (090-180)					



PEESO

Размер Ø 1/10 мм	070	090	110	130	150	170
183RF 15мм 330 205 682 336...	070	090	110	130	150	170
183RF 15мм 330 205 682 336...	SET (070-170)					
183RF 19мм 330 206 682 336...	070	090	110	130	150	170
183RF 19мм 330 206 682 336...	SET (070-170)					



ZEKRYA

CB151

Размер Ø 1/10 мм	016
L мм	10,7
OAL 23 мм	
CB 151 FGL 500 315 199 295 ...	016
OAL 28 мм	
CB 151 FG XL 500 316 199 295 ...	016



Безопасный
кончик

ENDOZ

CB152

Размер Ø 1/10 мм	014	016
L мм	9,0	9,0
OAL 23 мм		
CB 152 FGL 500 315 210 295 ...	014	016
OAL 28 мм		
CB 152 FG XL 500 316 210 295 ...	014	016



Безопасный
кончик

БОРЫ ДЛЯ ХИРУРГИИ



БОРЫ ДЛЯ ХИРУРГИИ

CB141

Размер Ø 1/10 мм	010	012	014	016	018	023	027	031	035	040
OAL 44,5 мм										
CB 141 HP 500 104 001 291 ...			014	016	018	023	027	031	035	040
OAL 26 мм										
CB 141 RAL 500 205 001 291 ...	010	012	014	016	018	023				
OAL 34 мм										
CB 141 RAXL 500 206 001 291 ...	010	012	014	016	018	023				



CB33R

Размер Ø 1/10 мм	016
L mm	4,4
FG XL	OAL 25 mm
500 316 194 007 ...	CB33R.316



CB161

Размер Ø 1/10 мм	016
L mm	9,0
OAL 44,5 мм	
CB 161 HP 500 104 408 295 ...	016
OAL 29 мм	
CB 161 RAL 500 205 408 295 ...	016
OAL 28 мм	
CB 161 FG XL 500 316 408 295 ...	016



CB162

Размер Ø 1/10 мм	016
L mm	9,0
OAL 44,5 мм	
CB 162 HP 500 104 408 297 ...	016
OAL 29 мм	
CB 162 RA L 500 205 408 297 ...	016
OAL 28 мм	
CB 162 FG XL 500 316 408 297 ...	016



CB163

Размер Ø 1/10 мм	016
L mm	5,0
CB 163 HP 500 104 406 297 ...	014
CB 163 RA L 500 205 406 297 ...	014



CB255E

Размер Ø 1/10 мм	O12
L мм	8,0
OAL 25 мм	
CB255E FG L 500 315 415 298 ...	O12
OAL 28 мм	
CB255E FG XL 500 316 415 298 ...	O12
OAL 44,5 мм	
CB255E HP 500 104 415 298 ...	O12



CB164

Размер Ø 1/10 мм	O10
L мм	6,0
OAL 44,5 мм	
CB 164 HP 500 104 407 297 ...	O10
OAL 29 мм	
CB 164 RA L 500 205 407 297 ...	O10



CB165

Размер Ø 1/10 мм	O23
L мм	7,0
OAL 44,5 мм	
CB 165 HP 500 104 408 297 ...	O23
OAL 29 мм	
CB 165 RA L 500 205 408 297 ...	O23



CB166

Размер Ø 1/10 мм	O21
L мм	10,0
OAL 44,5 мм	
CB 166 HP 500 104 409 297 ...	O21
OAL 29 мм	
CB 166 RA L 500 205 409 297 ...	O21



CB167

Размер Ø 1/10 мм	O23
L мм	10,0
OAL 44,5 мм	
CB 167 HP 500 104 410 297 ...	O23
OAL 29 мм	
CB 167 RA L 500 205 410 297 ...	O23



ПОДСТАВКИ ДЛЯ БОРОВ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОРОВ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

Стоматологические вращающиеся инструменты для обработки, препарирования, и полирования твердых, зубных тканей, а также материалов, используемых в стоматологии.

Все инструменты следует использовать согласно инструкции, с сохранением основных параметров работы.

Под параметрами работы подразумеваем: скорость вращения, силу давления, соосное крепление и применение соответствующих очищающих и дезинфицирующих препаратов. Под физическими параметрами подразумеваем: скорость резания, прочность инструмента на сгибание и сворачивание, температуру работы, характеристику вибрации.

1. Условия пользования:

- Боры упакованы в блистеры, следует открывать отрезая верхнюю часть упаковки (согласно картинке на упаковке),
- Установка инструмента должна осуществляться согласно инструкции для наконечников,
- Следует прикрепить инструмент как можно более соосно, не может иметь контакта с корпусом наконечника,
- Следует проверить рекомендуемую скорость вращения в минуту и, если невозможно набрать указанную скорость, замените инструмент;
- Во время работы следует пользоваться защитными очками,
- Следует пользоваться только технически исправными турбинными, угловыми и прямыми борами.

2. Рекомендуемая скорость вращения:

- Используйте инструменты в соответствии с параметрами, указанными на упаковке.
- Максимальная скорость определяется не только физическими параметрами обработки, а так-

же размером вибрации, поэтому нельзя никогда ее превышать. Превышение может стать причиной повреждения стоматологического наконечника.

- Минимальная скорость вращения лимитируется эффективностью обработки. Ниже этой скорости инструмент не работает соответственно ожиданиям.
- Основные правила: инструменты с большим диаметром требуют меньшей скорости вращения. Длинные инструменты требуют меньшей силы давления.

3. Рекомендуемое контактное усилие:

- Сила давления макс. 0,3–2 Н.
- Непревышение рекомендательной силы давления инструментов охраняет инструменты перед деформацией рабочей части.
- Непревышение рекомендательной силы давления инструментов, не допускает повреждения обрабатываемых тканей.
- Непревышение рекомендательной силы давления инструментов, не допускает повреждения подшипников стоматологического наконечника.

4. Охлаждение во время работы:

Охлаждение водным спреем является обязательным по законоположению. Это касается всех инструментов при использовании турбинных и угловых боров. Целью охлаждения является не понижение температуры работы инструмента, а не допущение аккумуляции тепла в зубе и инструменте.

Соблюдая вышеуказанные рекомендации, продлим срок работы инструментов и предотвратим возникновение побочных невыгодных результатов работы.

5. Стерилизация и очистка:

- Перед использованием следует дезинфицировать инструменты, очистить, удалить все органические частицы. Действие следует повторить после использования.
- Затем инструменты очистить

ультразвуком или под текущей водой. В случае необходимости действие повторить.

- После очистки следует осушить инструмент, в противном случае может корродировать.
- Инструменты необходимо стерилизовать в следующих условиях: Максимальная температура стерилизации 134°C/273,2°F. Время стерилизации (время экспозиции в температуре стерилизации, не меньше чем 20 минут при температуре 121°C/250°F или 5 минут при температуре 134°C/273,2°F).

Количество стерилизационных циклов определяется временем жизни продукта (однако не больше, чем 10 циклов).

6. Время жизни продукта:

Время жизни продукта это срок, в течение которого сохраняются его эксплуатационные качества. Потеря какой-либо из них (убыток в алмазном покрытии, никелевом покрытии, деформации) квалифицирует продукт к тому, чтобы элиминировать его из употребления.

7. Утилизация неисправных инструментов:

- Не пользуйтесь приборами с искривленными наконечниками (возможны вибрации).
- Не пользуйтесь приборами с признаками коррозии (риск фрагментации никелевого покрытия, а также алмазного покрытия и появления заражений).
- Не пользуйтесь недостаточно острыми приборами (термические явления, вибрации).

8. Способ хранения:

Изделие хранить в сухом, и не экспонированном на лучи солнца месте. После того, как продукт вынем из оригинальной упаковки, хранить в условиях, охраняющих перед загрязнением и механическими повреждениями.

В случае несоблюдения указанных рекомендаций существует риск для здоровья пациентов и повреждения инструментов.

Для заметок



☎ +7 (960) 914-01-11
☎ +7 (960) 916-07-05
☎ +7 (905) 078-55-77

✉ dss.42@mail.ru



🌐 shop-dss.ru